

ENDOSCOPE PRECLEANING GUIDE

EVIS (140/240), EXERA (160), EXERA II (180) & EXERA III (190) GI Endoscopes


— Refer to companion *ENDOSCOPE CLEANING GUIDE* for additional cleaning information —

WARNING: This guide is only a summary of the steps necessary to properly preclean your endoscope. Be sure to follow the detailed steps outlined in the *ENDOSCOPE REPROCESSING MANUAL* that was included with your endoscope when purchased and in the *ENDOSCOPE CLEANING GUIDE* for a summary of manual cleaning steps.

Be sure to follow precleaning with appropriate leakage testing, manual cleaning, and disinfection steps.


PRECLEANING – Immediately After Use

1

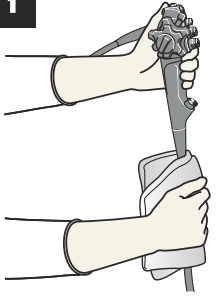


Wipe down insertion tube with a water-soaked cloth.

2

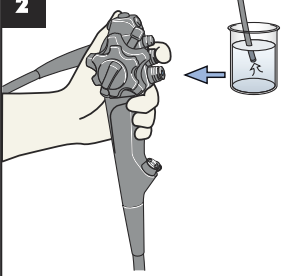

Aspirate water, then air through the suction channel.


3

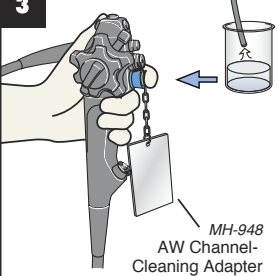

MH-948
AW Channel-Cleaning Adapter

Attach AW channel-cleaning adapter. Flushwater, then air, through air/water channels.


4

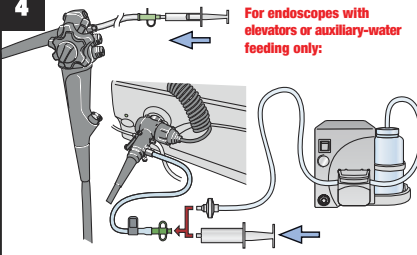

For endoscopes with elevators or auxiliary-water feeding only:


Flush water, then air, into elevator-wire channel/auxiliary-water channel. (Alternatively, the auxiliary-water channel may be flushed using the OFP pump.) The auxiliary water tube should remain attached during transport to reprocessing room.

5

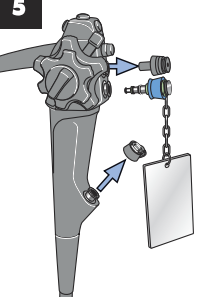

Disconnect all detachable parts.

6

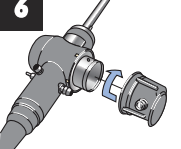

Attach water-resistant cap. This step is omitted for 190 endoscopes. Transport to the reprocessing room in a covered container.

NOTE: Ensure that the ETO cap is removed prior to leak testing 190 generation scopes.

OLYMPUS

● GUÍA DE LIMPIEZA DE ENDOSCOPIOS







Endoscopios gastrointestinales **EVIS (140/240), EXERA (160), EXERA II (180) y EXERA III (190)**

— Consulte la **GUÍA DE DESINFECCIÓN DE ENDOSCOPIOS** adjunta para obtener información sobre la desinfección. —

ADVERTENCIA: Esta guía es sólo un resumen de los pasos necesarios para realizar correctamente el prelavado del endoscopio. Asegúrese de seguir los pasos detallados descritos en el **MANUAL DE REPROCESAMIENTO DEL ENDOSCOPIOS** que se incluye con el endoscopio al momento de la compra y en la **GUÍA DE LIMPIEZA DE ENDOSCOPIOS** para un resumen de los pasos de limpieza manual.

Asegúrese de seguir el prelavado con las pruebas adecuadas de fugas, limpieza manual, y los pasos de desinfección.

LIMPIEZA PREVIA – Inmediatamente después del uso

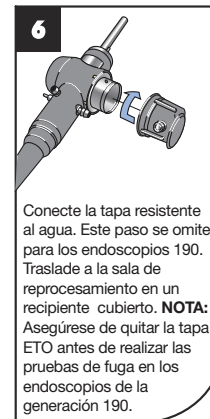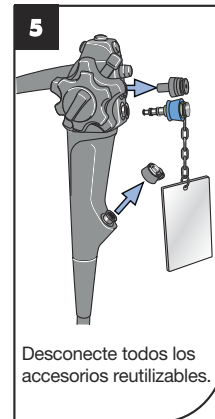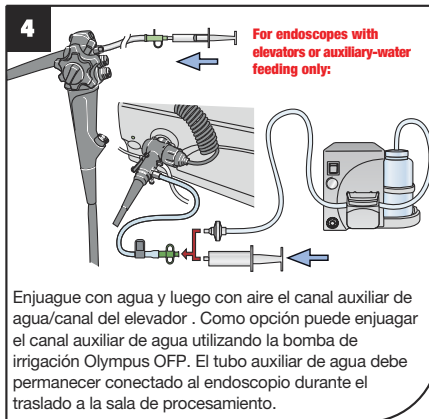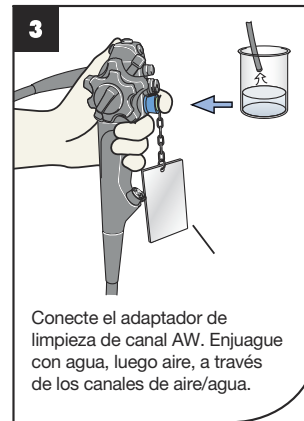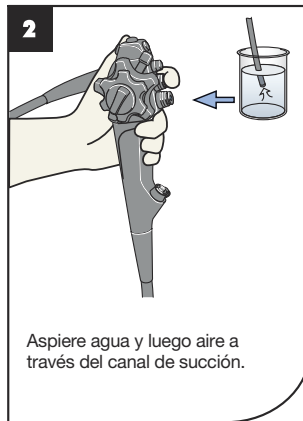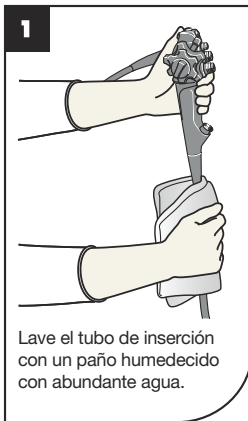

OLYMPUS