

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

ENF-GP

Rhino-Laryngo-Fiberskop




ENF-GP

Das mobile und zuverlässige Rhino-Laryngo-Fiberskop ENF-GP


Das ENF-GP liefert nicht nur große und helle Bilder mit hoher Auflösung auf der Basis der bewährten Optik des ENF-P4, sondern auch eine verbesserte Lichtleistung, die durch ein optimiertes Lichtverteilungssystem möglich wurde.

Wiederaufladbare EndoLED Lichtquelle

EndoLED WA91502A macht aus dem ENF-GP ein mobiles Fiberskop, mit dem Sie überall in der medizinischen Einrichtung Untersuchungen in hoher Bildqualität durchführen können.

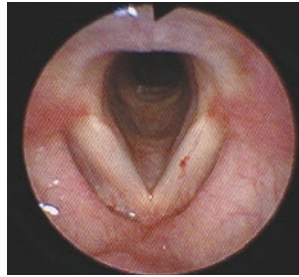


Nahbetrachtung

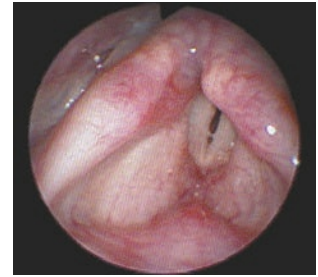

Betrachtung mit größerem Abstand


Weites Blickfeld / Ideale Länge: Ermöglichen die Betrachtung großer Bereiche

Das ENF-GP bietet ein weites Blickfeld von 85°, das eine exzellente Darstellung der Stimmbänder erlaubt. Die Länge von 300 mm erleichtert Untersuchungen der Nasenhöhlen, des Pharynx und ermöglicht bequeme Untersuchung des Larynx mit angemessenem Abstand zum Patienten.

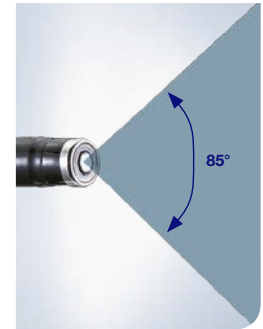


130° Abwinkelung: Erleichtert das Einführen und die Diagnostik

Der breite Abwinkelungsbereich erlaubt schonendes Einführen und erleichtert das Manövrieren, so dass eine gründliche Untersuchung des Larynx und Hypopharynx erfolgen kann.

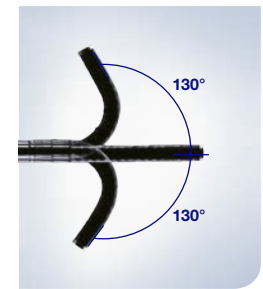

Systemübersicht

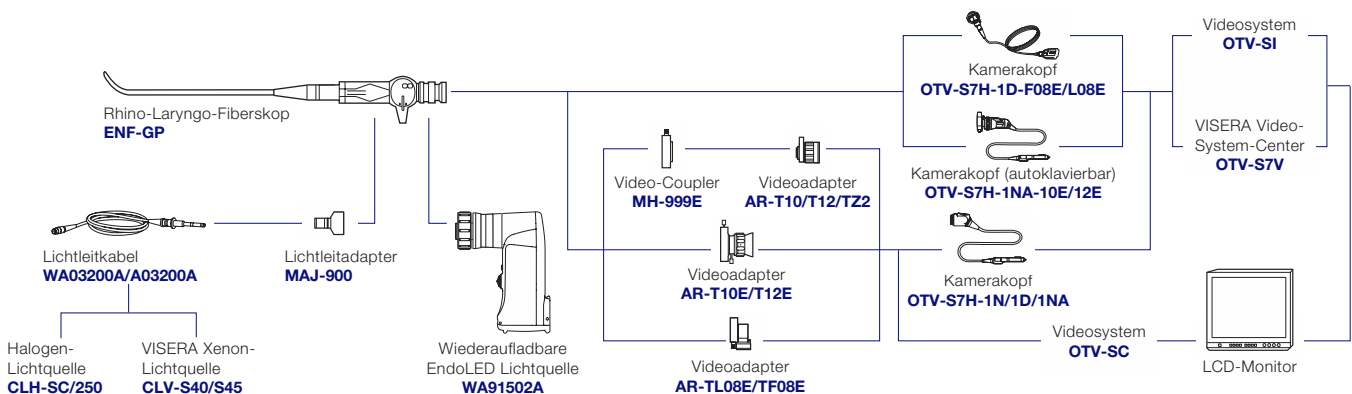

Spezifikationen

Optisches System	Blickfeld	85°
	Tiefenschärfe	5 - 50 mm
Einführteil	Außendurchmesser am Distalende	3,4 mm
	Außendurchmesser Einführteil	3,6 mm
	Arbeitslänge	300 mm
Abwinkelungsbereich	Abwinkelung	Oben/Unten 130°
Gesamtlänge		550 mm

Standard-Set

Rhino-Laryngo-Fiberskop ENF GP
MAJ-900 Lichtleitadapter
MB-156 Entlüftungskappe
Gebrauchsanweisung

Optionen

WA03200A/A03200A Lichtleitkabel
WA91502A Wiederaufladbare EndoLED Lichtquelle

Der Hersteller behält sich Änderungen der technischen Daten, der Ausstattung und des Designs ohne Vorankündigung vor.

OLYMPUS

OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH
Wendenstraße 14-18
20097 Hamburg, Deutschland
Medical Systems
Tel.: +49 800 200 444-213 Fax: +49 40 23773-5771
E-Mail: endo.sales@olympus.de
www.olympus.de

OLYMPUS AUSTRIA GES.M.B.H.
Shuttleworthstraße 25
1210 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 29101-224
Fax: +43 1 29101-226
E-Mail: mic@olympus.at
www.olympus.at

OLYMPUS SCHWEIZ AG
Chriesbaumstrasse 6
8604 Volketswil, Schweiz
Tel.: +41 44 94766-81
Fax: +41 44 94766-54
E-Mail: endo.ch@olympus.ch
www.olympus.ch