

TRATAMIENTO DE CÁLCULOS OLYMPUS

Dispositivos de Calidad para un Tratamiento Eficiente de Cálculos




TRATAMIENTO DE CÁLCULOS OLYMPUS

Olympus tiene una larga trayectoria ayudando a cubrir las necesidades de los médicos en el tratamiento de cálculos mediante el suministro de ureteroscopios rígidos y flexibles, y de los sistemas de vídeo asociados, por eso es muy consciente de los requisitos adicionales de estos procedimientos en cuanto a instrumentos de un solo uso, láseres de holmio y litotriptores.


Olympus ofrece ahora una gama completa de soluciones para el tratamiento de cálculos, con el fin de facilitar al máximo los procedimientos de dichos tratamientos mediante el uso de instrumentos innovadores y de calidad excepcional.

Olympus redefine constantemente sus soluciones integrales para procedimientos, que le permitirán obtener mejores resultados clínicos, mejorar la seguridad del paciente y cumplir los objetivos financieros de su organización. Olympus es su aliado a la hora de dar respuesta a las necesidades de sus procedimientos de ureteroscopia y le garantiza que estará a la vanguardia de la tecnología de “ver y tratar”.

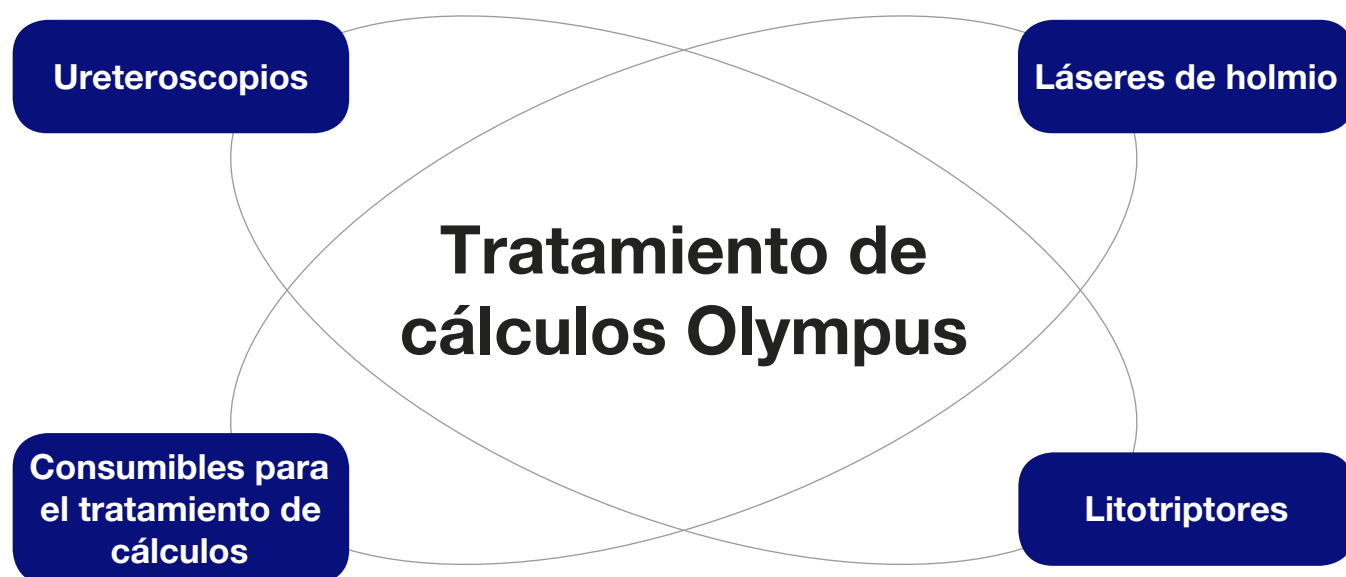



ACCESO

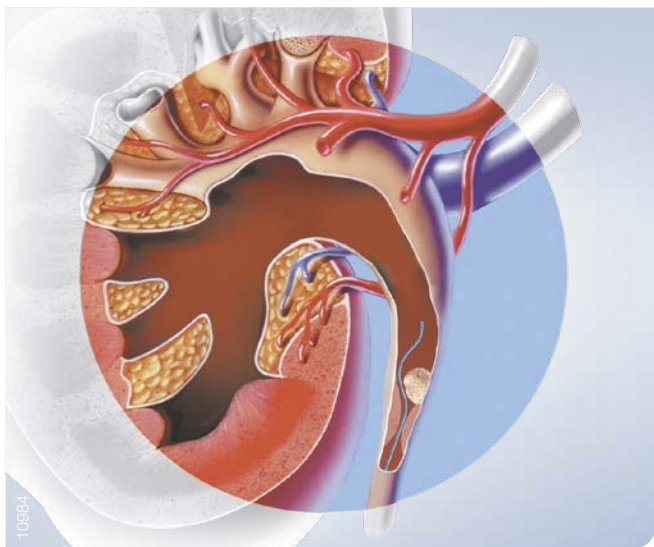


El acceso al uréter o riñón es esencial para cualquier urólogo que trate problemas de cálculos. Olympus es consciente de la importancia de realizar este acceso de una forma segura y rápida. Por este motivo, ponemos a su disposición una completa gama de guías de nitinol y politetrafluoroetileno (PTFE) con puntas de distintos diseños, adaptadas a las diferentes particularidades anatómicas.



Dispositivo de agarre y giro E-Z

El dispositivo de agarre y giro E-Z es una pequeña herramienta para ayudarle en sus procedimientos. Cuando se coloca en una guía angulada, girar este dispositivo para acceder al canal ureteral es extremadamente cómodo.


Guías de PTFE

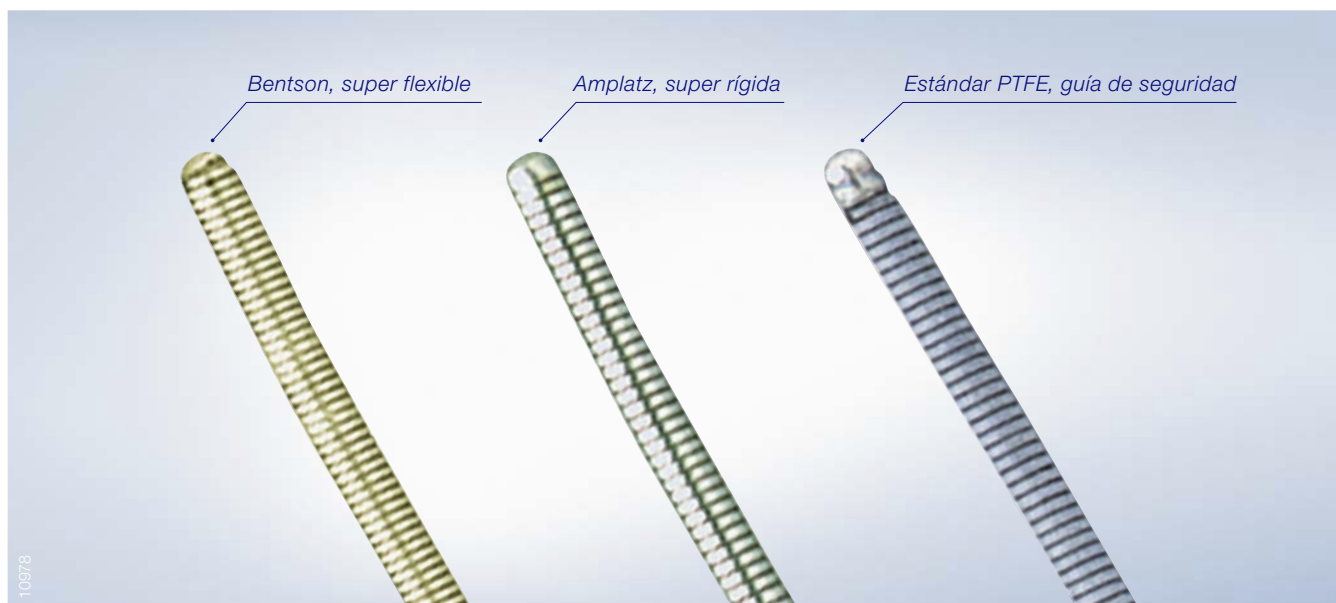

Guías híbridas

UltraTrack – Guía híbrida


- Centro de nitinol con extremo flexible hidrofílico y con recubierta PTFE.
- El extremo distal flexible hidrofílico facilita el acceso a través de estenosis y obstrucciones producidas por piedras.
- La cobertura en espiral de PTFE ayuda a la sujeción y el posicionamiento.
- El introductor permite al cirujano controlar de una forma fácil el avance de la guía.
- El extremo proximal flexible facilita la entrada del endoscopio.

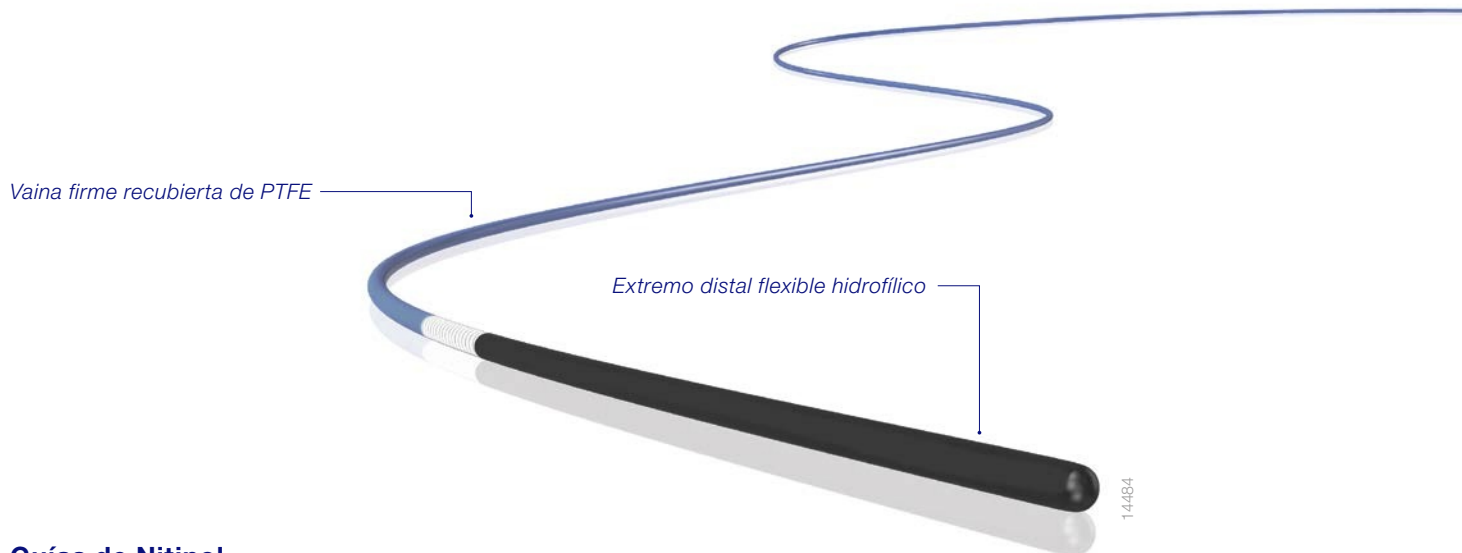

Guías de Nitinol

Quattro: una guía “dos en uno”

- Dos diseños de punta creados para adaptarse a diferentes particularidades anatómicas de pacientes, en una sola guía.
- Punta flexible dorada para acceder a zonas con características anatómicas complejas.
- Punta plateada semirígida que posibilita un acceso rápido y sencillo.
- Se diferencia extraordinariamente bien durante la fluoroscopia gracias a sus puntas de tungsteno.

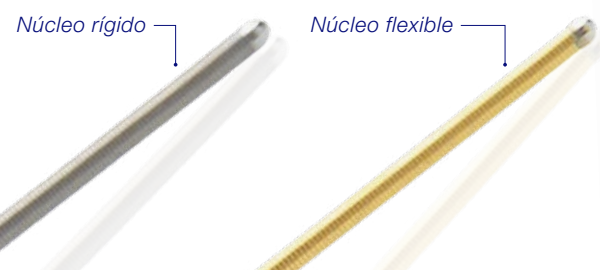


Guía SureGlider

- Adaptación sin problemas y sencilla a zonas de características anatómicas tortuosas.
- El núcleo de nitinol con revestimiento hidrofílico facilita el acceso inicial.
- Presenta un revestimiento radiopaco que posibilita una visibilidad clara y un fácil posicionamiento.



ACCESO Y DILATACIÓN

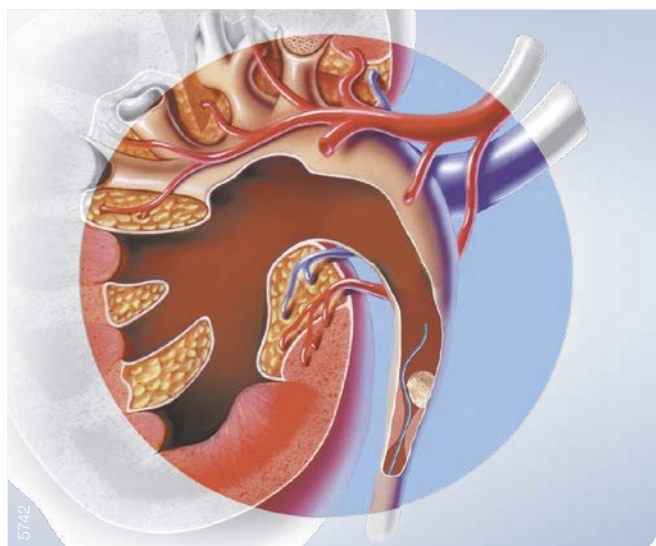

Los avances en la tecnología ureteroscópica de Olympus han permitido conseguir varillas de perfil más pequeño y puntas atraumáticas lubricadas que reducen las necesidades de dilatación ureteroscópica. Para complementar nuestra avanzada tecnología de endoscopios, hemos diseñado una gama de soluciones de dilatación de un solo uso, desde guías hasta balones de dilatación y vainas de acceso.



Catéteres

Además del catéter de extremo abierto estándar, Olympus ofrece la opción de disponer de un catéter de doble luz para facilitar la colocación de la guía de seguridad y la inyección de contraste durante la ureteroscopia:

- Conectores Luer-Lock codificados por color para conectar las luces distales y proximales y facilitar la colocación de la guía.
- La punta flexible de 6 Fr cambia gradualmente a un cuerpo de 10 Fr para conseguir una dilatación atraumática del orificio del uréter.

Punta que facilita una dilatación atraumática de 6 a 10 Fr

Vaina reforzada con acero inoxidable que evita el retorcimiento e impide que el ureteroscopio se quede atascado



Balones EZDilate

Los balones de dilatación EZDilate están disponibles en varios tamaños para conseguir dilatar el uréter y aliviar la estenosis ureteral de forma segura, así como para acceder de manera segura durante la intervención quirúrgica percutánea con un traumatismo mínimo para el paciente.

Revestimiento hidrofílico y siliconado para obtener una dilatación con poca fricción y en un solo paso

Punta radiopaca para garantizar la visualización segura antes del inflado

Vaina con estrechamiento para conseguir una inserción atraumática

Vaina de acceso UroPass


- Disponible en tamaños desde 10/12 hasta 13/15 Fr.
- Crea un conducto para el paso atraumático de varios instrumentos.
- La vaina reforzada de acero inoxidable evita el retorcimiento y soporta el colapso de las paredes laterales.
- El revestimiento hidrofílico reduce la fricción y facilita el paso.

Revestimiento hidrofílico que posibilita un acceso suave y sencillo

10798

287

VISUALIZACIÓN

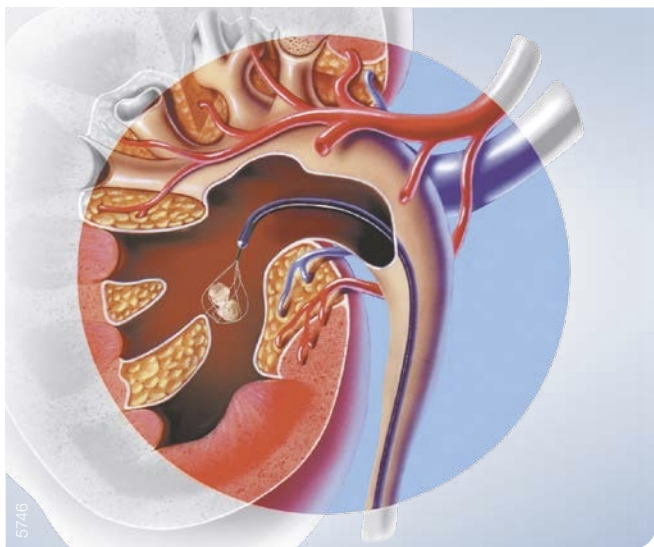

Vea lo que nunca antes ha visto: el sensor de imágenes CCD del extremo distal del videoendoscopio proporciona una imagen nítida sin efecto moiré con una reproducción a todo color sin necesidad de un cabezal de cámara.


Esta gama de productos de imagen se complementa con accesorios de un solo uso que facilitan el procedimiento.

Ureteroscopia flexible

Diseño ultrafino de 8,4 Fr y vaina rígida que facilitan el acceso y la maniobrabilidad:


- El URF-V2 encaja en una vaina de acceso de 10/12 Fr, lo que permite acceder a uréteres estrechos.
- La función de rotación de 120° permite que el facultativo cambie el ángulo de la vaina girando una anilla del mango. Esto permite mantener el láser activado por más tiempo, lo que hace que el tratamiento de los cálculos renales grandes sea factible.
- La mayor rigidez de la varilla mejora la dirección del ureteroscopio y posibilita llegar fácilmente al cáliz inferior.

La tecnología de chip en la punta ofrece una visualización nítida y permite que los procedimientos largos sean hasta un 20% más rápidos

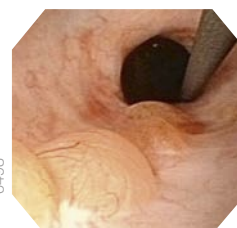

Función de rotación de 120° que aporta una mayor comodidad

Ureteroscopia semirrígida

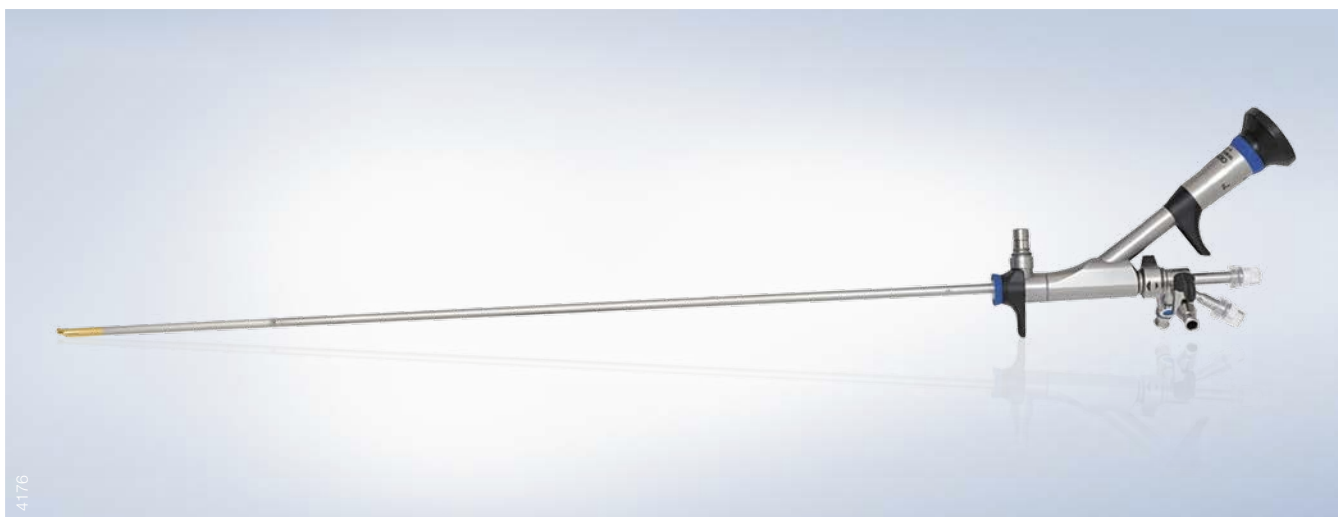

Olympus es conocida por ser una empresa innovadora en tecnología óptica, lo que queda patente en la sorprendente calidad de imagen de los ureteroscopios semirrígidos. Equipados con hasta 50.000 fibras y un diseño de punta atraumática, los diferentes ureteroscopios, con tamaños entre 6,4/7,8 Fr y 8,4/9,8 Fr, se ajustan a los requisitos de los procedimientos y a las preferencias de los urólogos.

Accesorios

La pequeña bomba manual Irri-Flo permite a los urólogos no solo controlar las condiciones de flujo, sino también eliminar los restos para asegurar una visualización óptima. La válvula de reflujo integrada permite disponer de un flujo de irrigación incluso sin utilizar la activación manual.




Sistema de irrigación

Los puertos de biopsia ajustables proporcionan una comodidad aún mayor al reducir las fugas y asegurar un ajuste seguro de la fibra de láser. La conexión Luer-Lock estándar aporta una gran versatilidad a la hora de utilizar estos accesorios con distintos endoscopios.



Puertos de biopsia

LITOTRICIA

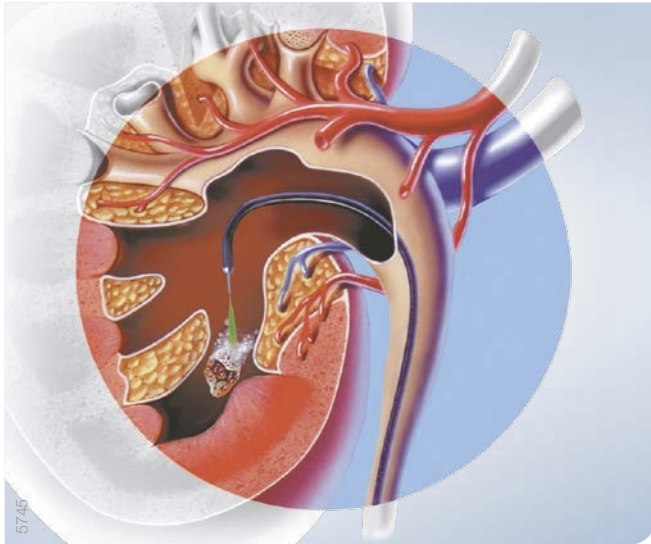

La fragmentación exitosa de los cálculos depende en gran medida de la capacidad de aplicar con precisión el nivel de energía adecuado, con la frecuencia de impacto apropiada a la zona correcta del cálculo que se va a tratar. Olympus ofrece unas excelentes opciones tecnológicas avanzadas de litotricia para la fragmentación y la extracción de cálculos renales, ureterales y vesicales, independientemente de su tamaño, composición y ubicación.

Litotriptor ShockPulse-SE

El litotriptor ShockPulse-SE utiliza una única sonda que produce una acción de impacto ultrasónico y mecánico para fragmentar los cálculos más duros de manera eficaz. La sonda está diseñada con un lumen amplio para fragmentar y extraer cálculos con una velocidad y seguridad diferente a la que teníamos. El hecho de que pueda manejarse sujetando la empuñadura con una sola mano lo hace extremadamente útil para el trabajo cotidiano. Su versatilidad en cuanto a variedad de sondas para ureteroscopia rígida y NPCL es excepcional.



Láser Medilas H Solvo de holmio-YAG de 30 vatios

El innovador sistema láser Solvo de holmio-YAG de 30 W resulta ideal para eliminar cálculos, independientemente de la consistencia química y la dureza de estos, así como para determinadas intervenciones en tejidos blandos en procedimientos endourológicos.

- Pulverización de cálculos de alta frecuencia gracias a sus 30 W de potencia.
- Arranque rápido sin fase de calentamiento.
- Control mediante una pantalla táctil de alta resolución.
- Pedal inalámbrico exclusivo que permite al urólogo controlar los ajustes y mejora la comodidad.
- Salida DVI a un monitor externo para disponer de una mejor visualización de los ajustes del láser.



Modos de aplicación del láser

- Fragmentación, pulverización y tratamiento de tejido blando son modos de aplicación implementados en la pantalla del usuario.
- La aplicación automática de los modos ajusta la longitud de onda y el pulso para cada aplicación.
- Tratamiento muy eficiente para varios tipos de piedra y aplicación en tejidos blandos.




Fibras de láser Dornier

El láser Medilas H Solvo de Dornier de 30 vatios viene con fibras de láser con tamaños de 200 a 1.000 micrones que posibilitan adaptarse a los requisitos de los procedimientos asociados a los cálculos ureterales, renales y vesicales.

- Las fibras están rodeadas por una gran funda de cuarzo, lo que permite controlar la absorción de la luz del láser y, de esta manera, evitar daños en el endoscopio.
- Conector Delrin SMA con un excelente radio de flexión de 7 mm y de transmisión de eficacia probada con fibra de 270 µm a 10 y 30 W (fuente: Dornier MedTech Analysis, diciembre de 2012).



EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS

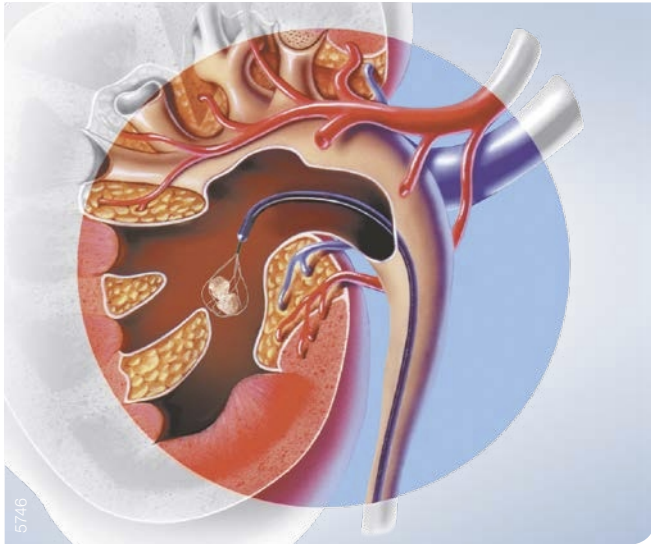


Olympus se ha centrado en el desarrollo de tecnologías que simplifican la extracción de fragmentos de cálculos y tejidos de todas las formas y tamaños en cualquier situación anatómica, al tiempo que minimizan el traumatismo para el paciente y reducen la duración de los procedimientos.

Cestas de nitinol sin punta

El sencillo diseño de la cesta de cuatro alambres facilita la captura y extracción de cálculos. El diseño sin punta con alambres redondeados es seguro para su uso intrarrenal y minimiza el traumatismo de los tejidos durante la manipulación. La varilla accionada por torsión y el mango ergonómico ofrecen control y seguridad para garantizar una extracción de cálculos segura y eficaz.

- La cesta de alambre trenzado de gran durabilidad mantiene su forma y estructura incluso bajo una presión extrema.
- La punta distal atraumática está diseñada para la ureteroscopia flexible.
- Está disponible en tamaños de 1,8, 2,2 y 3,0 Fr para adaptarse a las diferentes características anatómicas de los pacientes y preferencias de los médicos.
- La vaina de polímero está diseñada para ofrecer durabilidad y permite extraer varios fragmentos.

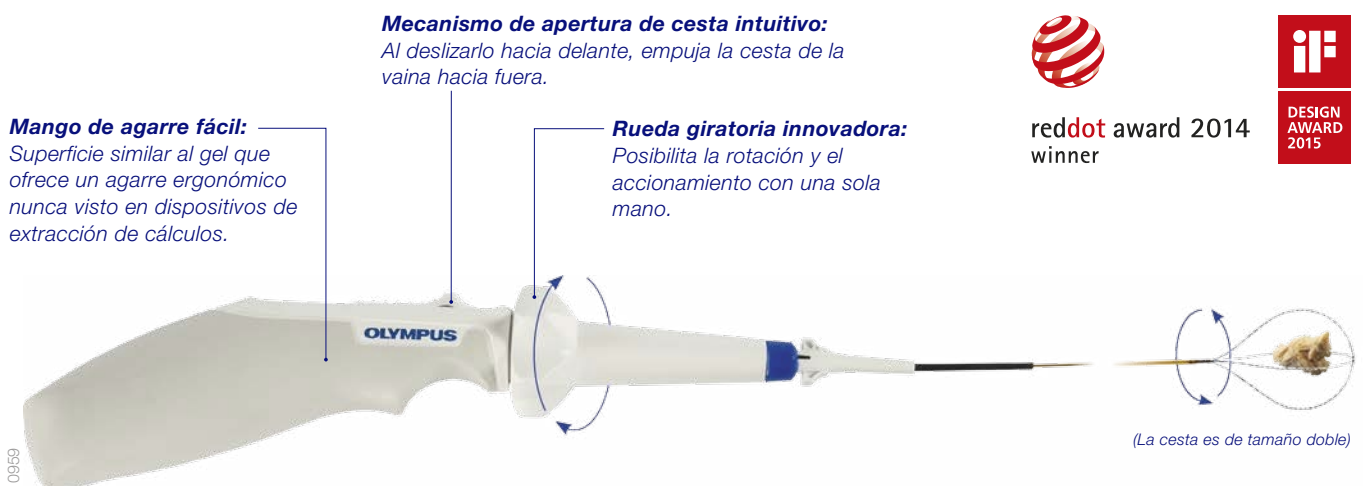

Cesta Ultra-Catch de nitinol sin punta de cuatro alambres

Diseño sin punta con alambres redondeados de nitinol:

Genuino diseño de disco distal patentado sin punta que permite una manipulación atraumática de la cesta.


Diseño de alambres trenzados:

Aporta resistencia radial para realizar manipulaciones en partes del cuerpo que presentan restricciones.



Varilla accionada por torsión que facilita la extracción de cálculos

- Su estructura de nitinol evita el retorcimiento, por lo que ofrece una seguridad, funcionalidad y durabilidad excepcionales.
- Extremo distal extremadamente flexible para minimizar la pérdida de deformación al extraer fragmentos en el caliz inferior.

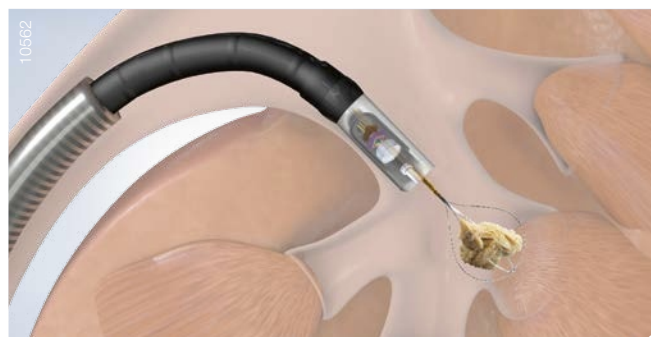

URF-V2: diámetro externo fino de 8,4 Fr que facilita el acceso al riñón.

Formas de cestas adicionales para dar respuesta a sus necesidades clínicas

Cesta X-Catch de nitinol sin punta de seis alambres


El diseño emparejado permite capturar varios cálculos pequeños a la vez para ahorrar tiempo.

Gama de cestas de acero inoxidable

Disponibles en versiones de cuatro alambres, helicoidales y con pinzas de agarre para adaptarse a las características y la ubicación de los cálculos.





DRENAJE

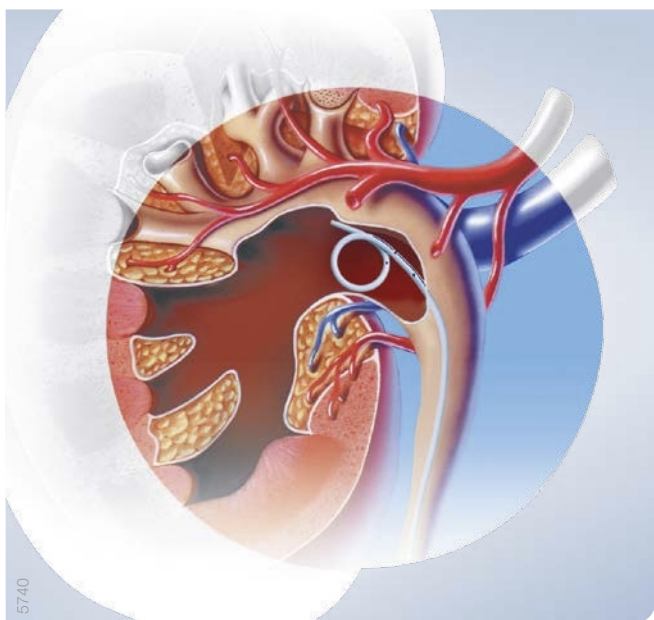

Ofrecemos una amplia selección de catéteres de calidad excepcional, que incluye desde modelos especiales hasta otros de uso diario. Nuestros catéteres J y doble J, así como el catéter UroGuide, minimizan la formación de incrustaciones gracias a que están fabricados en silicona. La silicona es utilizada en diversas aplicaciones médicas porque es más suave y permite una inserción y una retirada más fácil.

Olympus comprende las necesidades de sus procedimientos y es una empresa pionera en la tecnología avanzada de drenaje sin riesgos. Como indicación de la calidad del material, todos los catéteres TecoFlex están homologados para un tiempo de inserción de 365 días.

Catéteres ureterales de silicona

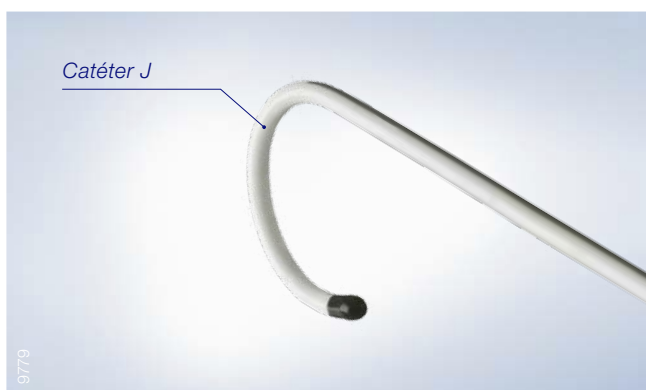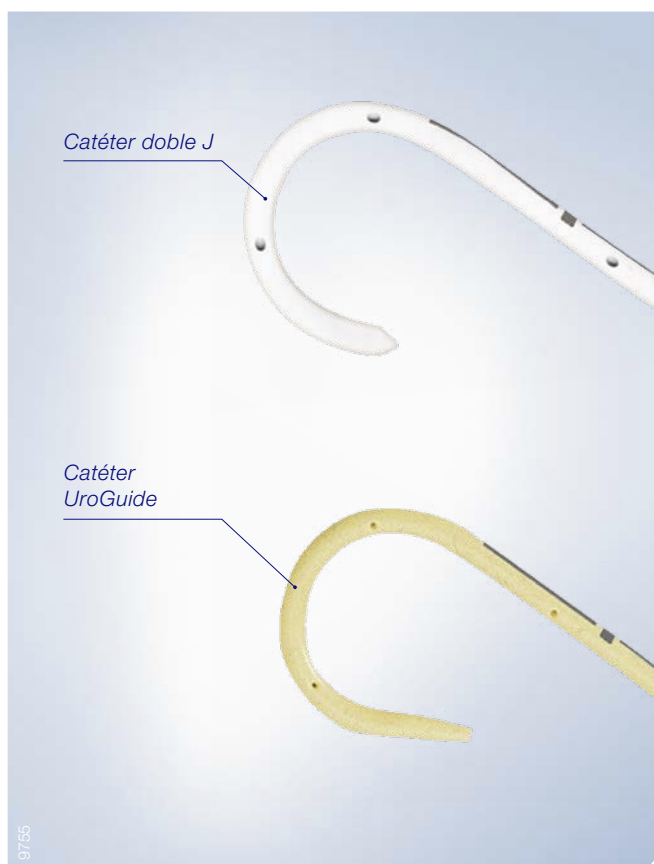

Catéter J

Catéter J de 90 cm de longitud que ofrece un extraordinario drenaje.

Catéter doble J

Catéter de silicona con puntas cerradas que ofrece drenaje fiable tras el tratamiento de cálculos.

Catéter UroGuide

Catéter de silicona con extremos abiertos que facilita la inserción y ofrece una gran resistencia a la formación de incrustaciones.

Catéter ureteral TecoFlex

LithoStent

Catéter de TecoFlex de forma triangular para resistir el colapso de las paredes laterales y asegurar una succión optimizada.



Catéter Quadra-Coil

Catéter TecoFlex flexible con bucle especialmente diseñado para la vejiga. El concepto de longitud variable, de 22 a 28 cm, permite adaptarla a la medida del paciente durante su colocación.




Catéter doble J clásico

Catéter TecoFlex flexible que ofrece un gran confort al paciente debido a la suavidad del material.



Lubri-Flex

Catéter TecoFlex rígido para conseguir una colocación segura y fiable.

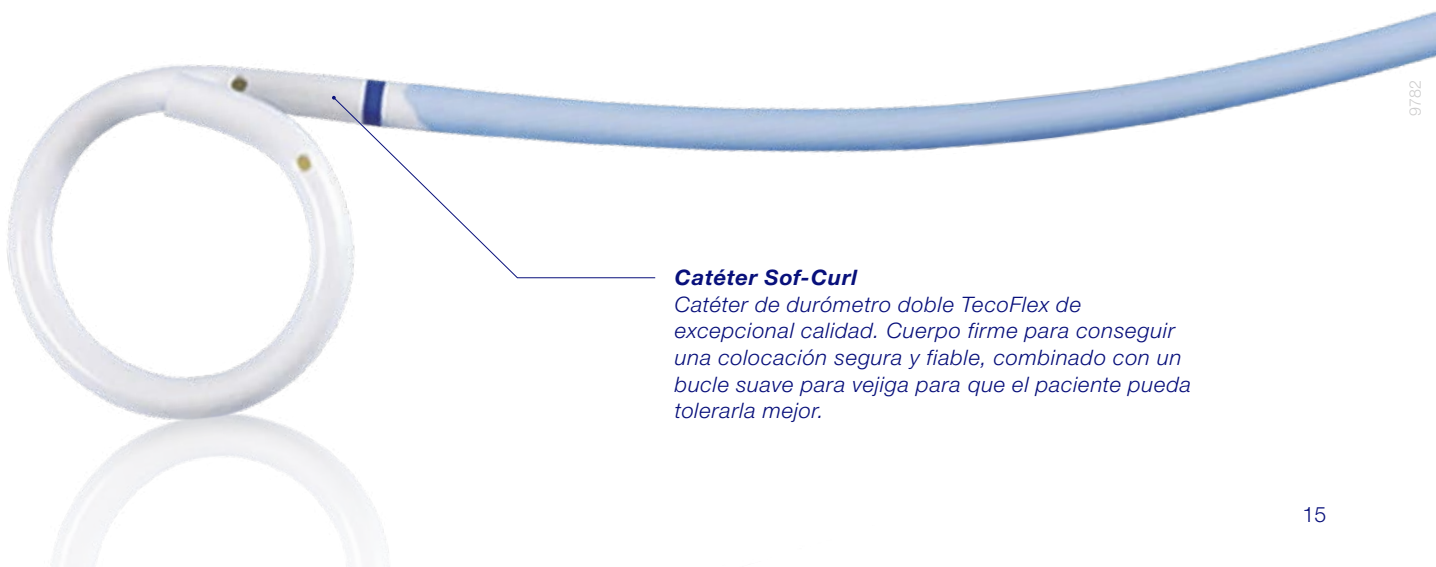


Catéter Sof-Curl

Catéter de durómetro doble TecoFlex de excepcional calidad. Cuerpo firme para conseguir una colocación segura y fiable, combinado con un bucle suave para vejiga para que el paciente pueda tolerarla mejor.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Guía híbrida

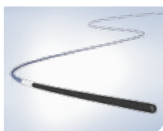

UltraTrack

Referencia	Tamaño	Longitud	Punta	Cantidad
EGGWH3505RA	0.035"	150 cm	5 cm, Angulada	5/caja
EGGWH3505R	0.035"	150 cm	5 cm, Recta	5/caja
EGGWH3805RA	0.038"	150 cm	5 cm, Angulada	5/caja
EGGWH3805R	0.038"	150 cm	5 cm, Recta	5/caja

Guías de nitinol



SureGlide

Referencia	Tamaño	Longitud	Punta	Cantidad
EG15BX	0,025"	150 cm	Recta	5/caja
EG16BX	0,025"	150 cm	Angulada	5/caja
EG35BX	0,035"	150 cm	Recta	5/caja
EG36BX	0,035"	150 cm	Angulada	5/caja
EG38BX	0,038"	150 cm	Recta	5/caja
EG39BX	0,038"	150 cm	Angulada	5/caja

SureGlide TC

Referencia	Tamaño	Longitud	Punta	Cantidad
EG41BX	0,035"	150 cm	Recta	5/caja
EG42BX	0,038"	150 cm	Recta	5/caja
EG43BX	0,035"	150 cm	Angulada	5/caja
EG44BX	0,038"	150 cm	Angulada	5/caja

Quattro

Referencia	Tamaño	Longitud	Punta	Cantidad
EG50BX	0,035"	150 cm	Recta	5/caja

Dispositivo de agarre y giro E-Z

Referencia	Descripción
EGGWT	Dispositivo de agarre y giro E-Z, 5/caja

Guías de politetrafluoroetileno (PTFE)



Bentson

Referencia	Tamaño	Longitud	Punta	Cantidad
EG10BX	0,035"	150 cm	15 cm	5/caja
EG12BX	0,038"	150 cm	15 cm	5/caja

Amplatz

Referencia	Tamaño	Longitud	Punta	Cantidad
EG13BX	0,035"	150 cm	9 cm	5/caja
EG14BX	0,038"	150 cm	9 cm	5/caja

Revestida de PTFE

Referencia	Tamaño	Longitud	Punta	Cantidad
EG22BX	0,025"	150 cm	3 cm flex.	5/caja
EG25BX	0,035"	150 cm	3 cm flex.	5/caja
EG26BX	0,035"	150 cm	Movable	5/caja
EG28BX	0,038"	150 cm	3 cm flex.	5/caja
EG29BX	0,038"	150 cm	Movable	5/caja

PTFE extrarrígida TC

Referencia	Tamaño	Longitud	Punta	Cantidad
EG24BX	0,038"	150 cm	3 cm flex.	5/caja

Catéter



Catéter ureteral

Referencia	Descripción
EG608BX	Catéter ureteral de doble luz, 6/10 Fr, 57 cm, 5/caja

Vaina de acceso ureteral UroPass




Vaina de acceso ureteral UroPass

Referencia	Descripción
EG61024BX	UroPass 10/12 Fr x 24 cm (5/caja)
EG61038BX	UroPass 10/12 Fr x 38 cm (5/caja)
EG61046BX	UroPass 10/12 Fr x 46 cm (5/caja)
EG61054BX	UroPass 10/12 Fr x 54 cm (5/caja)
EG61124BX	UroPass 11/13 Fr x 24 cm (5/caja)
EG61138BX	UroPass 11/13 Fr x 38 cm (5/caja)
EG61146BX	UroPass 11/13 Fr x 46 cm (5/caja)
EG61154BX	UroPass 11/13 Fr x 54 cm (5/caja)
EG61224BX	UroPass 12/14 Fr x 24 cm (5/caja)
EG61238BX	UroPass 12/14 Fr x 38 cm (5/caja)
EG61246BX	UroPass 12/14 Fr x 46 cm (5/caja)
EG61254BX	UroPass 12/14 Fr x 54 cm (5/caja)
EG61324BX	UroPass 13/15 Fr x 24 cm (5/caja)
EG61338BX	UroPass 13/15 Fr x 38 cm (5/caja)
EG61346BX	UroPass 13/15 Fr x 46 cm (5/caja)
EG61354BX	UroPass 13/15 Fr x 54 cm (5/caja)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Balón de dilatación Nephro-EZDilate

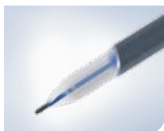

Kit de balón de dilatación con dispositivo de inflado de 25 cc

Referencia	Descripción
EGBPCN0815K	Kit con balón para NPCL y dispositivo de inflado (24 Fr) x 15 cm
EGBPCN1015K	Kit con balón para NPCL y dispositivo de inflado (30 Fr) x 15 cm

Balones de dilatación individuales

Referencia	Descripción
EGBPCN0815	Balón para NPCL, 8 mm (24 Fr) x 15 cm
EGBPCN1015	Balón para NPCL, 10 mm (30 Fr) x 15 cm
EGBINF2530	Dispositivo de inflado de balón

Balón de dilatación Uro-EZDilate

Kit de balón de dilatación con dispositivo de inflado de 25 cc

Referencia	Descripción
EGBURS0404K	Kit con balón para URS y dispositivo de inflado 4 mm (12 Fr) x 4 cm
EGBURS0410K	Kit con balón para URS y dispositivo de inflado 4 mm (12 Fr) x 10 cm
EGBURS0504K	Kit con balón para URS y dispositivo de inflado 5 mm (15 Fr) x 4 cm
EGBURS0510K	Kit con balón para URS y dispositivo de inflado 5 mm (15 Fr) x 10 cm
EGBURS0604K	Kit con balón para URS y dispositivo de inflado 6 mm (18 Fr) x 4 cm
EGBURS0610K	Kit con balón para URS y dispositivo de inflado 6 mm (18 Fr) x 10 cm

Balones de dilatación individuales

Referencia	Descripción
EGBURS0404	Balón para URS, 4 mm (12 Fr) x 4 cm
EGBURS0410	Balón para URS, 4 mm (12 Fr) x 10 cm
EGBURS0504	Balón para URS, 5 mm (15 Fr) x 4 cm
EGBURS0510	Balón para URS, 5 mm (15 Fr) x 10 cm
EGBURS0604	Balón para URS, 6 mm (18 Fr) x 4 cm
EGBURS0610	Balón para URS, 6 mm (18 Fr) x 10 cm
EGBINF2530	Dispositivo de inflado de balón

Dispositivos de nitinol




Cesta Ultra-Catch de nitinol sin punta de 4 alambres

Referencia	Diámetro	Tamaño de la cesta
EGNT4W18115	1,8 Fr	11 mm
EGNT4W22115	2,2 Fr	14 mm
EGNT4W30115	3,0 Fr	18 mm

Cesta X-Catch de nitinol sin punta de 6 alambres

Referencia	Diámetro	Tamaño de la cesta
EGNTCP18115	1,8 Fr	11 mm
EGNTCP22115	2,2 Fr	14 mm
EGNTCP30115	3,0 Fr	17 mm

Dispositivos de acero inoxidable

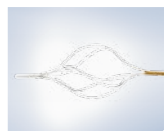

Cesta esférica SurLok

Referencia	Diámetro	Alambres	Longitud
EG5710002	2,4 Fr	4	120 cm
EG5710005	3,0 Fr	4	120 cm
EG5710009	4,5 Fr	4	70 cm

Cesta helicoidal SurLok

Referencia	Diámetro	Alambres	Longitud
EG5700002	1,9 Fr	3	120 cm
EG5700005	3,0 Fr	4	90 cm
EG5700014	4,5 Fr	6	70 cm

Pinzas de agarre SurLok

Referencia	Diámetro	Alambres	Longitud
EG5720001	2,4 Fr	3	120 cm
EG5720004	3,0 Fr	3	120 cm

Catéteres ureterales de silicona



Catéteres ureterales doble J (extremos cerrados)

Referencia	Diámetro	Longitud
EG5201800	6,0 Fr	12 cm
EG5202000	6,0 Fr	16 cm
EG5202600	6,0 Fr	20 cm
EG5202700	6,0 Fr	22 cm
EG5202800	6,0 Fr	24 cm
EG5202100	6,0 Fr	26 cm
EG5202200	6,0 Fr	28 cm
EG5202400	6,0 Fr	30 cm
EG5203600	7,0 Fr	12 cm
EG5204000	7,0 Fr	16 cm
EG5204600	7,0 Fr	20 cm
EG5204700	7,0 Fr	22 cm
EG5204800	7,0 Fr	24 cm
EG5204100	7,0 Fr	26 cm
EG5204200	7,0 Fr	28 cm
EG5204400	7,0 Fr	30 cm
EG5208600	8,5 Fr	12 cm
EG5209000	8,5 Fr	16 cm
EG5209600	8,5 Fr	20 cm
EG5209050	8,5 Fr	22 cm
EG5209800	8,5 Fr	24 cm
EG5209100	8,5 Fr	26 cm
EG5209200	8,5 Fr	28 cm
EG5209400	8,5 Fr	30 cm

Cada catéter ureteral doble J incluye un hilo de nailon trenzado, una guía con revestimiento de PTFE de 0,028" × 100 cm y un catéter de empuje.

Catéter J de desviación urinaria (extremos abiertos)

Referencia	Diámetro	Longitud
EG5230600	7,0 Fr	90 cm
EG5230800	8,5 Fr	90 cm

Cada catéter J incluye dos catéteres de desviación urinaria y una guía de revestimiento de PTFE de 0,028" × 120 cm.

Catéteres ureterales UroGuide (extremos abiertos)

Referencia	Diámetro	Longitud
EG5496022	6,0 Fr	22 cm
EG5496024	6,0 Fr	24 cm
EG5496026	6,0 Fr	26 cm
EG5496028	6,0 Fr	28 cm
EG5496030	6,0 Fr	30 cm
EG5497022	7,0 Fr	22 cm
EG5497024	7,0 Fr	24 cm
EG5497026	7,0 Fr	26 cm
EG5497028	7,0 Fr	28 cm
EG5497030	7,0 Fr	30 cm
EG5498522	8,5 Fr	22 cm
EG5498524	8,5 Fr	24 cm
EG5498526	8,5 Fr	26 cm
EG5498528	8,5 Fr	28 cm
EG5498530	8,5 Fr	30 cm

Cada catéter ureteral UroGuide incluye un hilo de nailon trenzado y un catéter de empuje.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Catéteres ureterales TecoFlex



Endoprótesis ureterales Lubri-Flex (extremos abiertos)

Referencia	Diámetro	Longitud
EG5554508	4.5 Fr	8 cm
EG5554510	4.5 Fr	10 cm
EG5554512	4.5 Fr	12 cm
EG5554514	4.5 Fr	14 cm
EG5554516	4.5 Fr	16 cm
EG5554518	4.5 Fr	18 cm
EG5554520	4.5 Fr	20 cm
EG5554522	4.5 Fr	22 cm
EG5554524	4.5 Fr	24 cm
EG5554526	4.5 Fr	26 cm
EG5554528	4.5 Fr	28 cm
EG5556022	6.0 Fr	22 cm
EG5556024	6.0 Fr	24 cm
EG5556026	6.0 Fr	26 cm
EG5556028	6.0 Fr	28 cm
EG5556030	6.0 Fr	30 cm
EG5557022	7.0 Fr	22 cm
EG5557024	7.0 Fr	24 cm
EG5557026	7.0 Fr	26 cm
EG5557028	7.0 Fr	28 cm
EG5557030	7.0 Fr	30 cm
EG5558522	8.5 Fr	22 cm
EG5558524	8.5 Fr	24 cm
EG5558526	8.5 Fr	26 cm
EG5558528	8.5 Fr	28 cm
EG5558530	8.5 Fr	30 cm

Catéteres ureterales LithoStent (extremos abiertos)

Referencia	Diámetro	Longitud
EG5637008	7,0 Fr	8 cm
EG5637010	7,0 Fr	10 cm
EG5637012	7,0 Fr	12 cm
EG5637016	7,0 Fr	16 cm
EG5637022	7,0 Fr	22 cm
EG5637024	7,0 Fr	24 cm
EG5637026	7,0 Fr	26 cm
EG5637028	7,0 Fr	28 cm

Catéteres ureterales Quadra-Coil de longitud variable (extremos abiertos)

Referencia	Diámetro	Longitud
EG5001945	4,5 Fr	22-28 cm
EG5001960	6,0 Fr	22-28 cm
EG5001970	7,0 Fr	22-28 cm
EG5001985	8,5 Fr	22-28 cm

Catéteres doble J clásico revestida (extremos abiertos)

Referencia	Diámetro	Longitud
EG5604508	4,5 Fr	8 cm
EG5604510	4,5 Fr	10 cm
EG5604512	4,5 Fr	12 cm
EG5604514	4,5 Fr	14 cm
EG5604516	4,5 Fr	16 cm
EG5604518	4,5 Fr	18 cm
EG5604520	4,5 Fr	20 cm
EG5604522	4,5 Fr	22 cm
EG5604524	4,5 Fr	24 cm
EG5604526	4,5 Fr	26 cm
EG5604528	4,5 Fr	28 cm
EG5606020	6,0 Fr	20 cm
EG5606022	6,0 Fr	22 cm

Catéteres doble J clásico revestida (extremos abiertos)

Referencia	Diámetro	Longitud
EG5606024	6.0 Fr	24 cm
EG5606026	6.0 Fr	26 cm
EG5606028	6.0 Fr	28 cm
EG5606030	6.0 Fr	30 cm
EG5607020	7.0 Fr	20 cm
EG5607022	7.0 Fr	22 cm
EG5607024	7.0 Fr	24 cm
EG5607026	7.0 Fr	26 cm
EG5607028	7.0 Fr	28 cm
EG5607030	7.0 Fr	30 cm
EG5608520	8.5 Fr	20 cm
EG5608522	8.5 Fr	22 cm
EG5608524	8.5 Fr	24 cm
EG5608526	8.5 Fr	26 cm
EG5608528	8.5 Fr	28 cm
EG5608530	8.5 Fr	30 cm

Catéteres ureterales Sof-Curl (extremos abiertos)

Referencia	Diámetro	Longitud
EGSSC4508	4.5 Fr	8 cm
EGSSC4510	4.5 Fr	10 cm
EGSSC4512	4.5 Fr	12 cm
EGSSC4514	4.5 Fr	14 cm
EGSSC4516	4.5 Fr	16 cm
EGSSC4518	4.5 Fr	18 cm
EGSSC4520	4.5 Fr	20 cm
EGSSC4522	4.5 Fr	22 cm
EGSSC4524	4.5 Fr	24 cm
EGSSC4526	4.5 Fr	26 cm
EGSSC4528	4.5 Fr	28 cm

Catéteres ureterales Sof-Curl (extremos abiertos)

Referencia	Diámetro	Longitud
EGSSC4530	4.5 Fr	30 cm
EGSSC4532	4.5 Fr	32 cm
EGSSC6020	6.0 Fr	20 cm
EGSSC6022	6.0 Fr	22 cm
EGSSC6024	6.0 Fr	24 cm
EGSSC6026	6.0 Fr	26 cm
EGSSC6028	6.0 Fr	28 cm
EGSSC6030	6.0 Fr	30 cm
EGSSC6032	6.0 Fr	32 cm
EGSSC7020	7.0 Fr	20 cm
EGSSC7022	7.0 Fr	22 cm
EGSSC7024	7.0 Fr	24 cm
EGSSC7026	7.0 Fr	26 cm
EGSSC7028	7.0 Fr	28 cm
EGSSC7030	7.0 Fr	30 cm
EGSSC7032	7.0 Fr	32 cm
EGSSC8520	8.5 Fr	20 cm
EGSSC8522	8.5 Fr	22 cm
EGSSC8524	8.5 Fr	24 cm
EGSSC8526	8.5 Fr	26 cm
EGSSC8528	8.5 Fr	28 cm
EGSSC8530	8.5 Fr	30 cm
EGSSC8532	8.5 Fr	32 cm

Cada catéter ureteral TecoFlex se suministra con un hilo de nailon trenzado, y con un empujador de catéter RAMROD con extremo metálico.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Accesorios



Sistema de irrigación

Referencia	Descripción
EG5920002BX	Sistema de irrigación manual Irri-Flo, jeringa de 12 cc, conector Luer-Lock, 5/caja
EG5920000	Sistema de irrigación manual Irri-Flo, jeringa de 12 cc, conector Luer-Lock, 1/caja

Puerto y conectores

Referencia	Descripción
EGBPS-A	Puerto de biopsia ajustable para accesorios de hasta 6 Fr, 5/caja
EGBPS-Y	Puerto de biopsia ajustable para accesorios de hasta 9 Fr, 5/caja
EGUBP-Y	Puerto de biopsia con conector Luer-Lock en "Y", estériles, 6/caja
EGCS-W7S	Puerto autosellante, estéril, para accesorios de hasta 7 Fr, 6/caja
EGAUR-BP	Puerto de orificio de biopsia, estéril, para accesorios de hasta 3 Fr, 6/caja
EGCS-RB	Puerto, color rojo, ciego, silicona, 12/caja
EGCS-B612	Puerto color azul, silicona, para accesorios de hasta 12 Fr, 12/caja
EGCS-G5	Puerto de silicona, para accesorios de hasta 5 Fr, 6/caja
EGCS-G7	Puerto de silicona, para accesorios de hasta 7 Fr, 12/caja

Ureteroscopios flexibles



Referencia	Descripción
N4506330	Videoureterorrenoscopio flexible URF-V2, diámetro del tubo de inserción exterior de 8,4 Fr, canal de trabajo de 3,6 Fr, NBI, angulación de 275° hacia arriba/275° hacia abajo
N4502030	Ureterorrenoscopio flexible URF-P6, diámetro del tubo de inserción exterior de 7,95 Fr, canal de trabajo de 3,6 Fr, flexión 275° arriba / 275° abajo
WA05991A	Bandeja de instrumentos para el reprocesado de ureteroscopios flexibles

Ureteroscopios semirrígidos



Referencia	Descripción
WA29040A	Ureteroscopio de un canal OES Pro, 6,4/7,8 Fr x 430 mm, canal de 4,2 Fr, dirección visual de 7°, ocular angulado
WA29041A	Ureteroscopio de un canal OES Pro, 6,4/7,8 Fr x 330 mm, canal de 4,2 Fr, dirección visual de 7°, ocular angulado
WA29042A	Ureteroscopio de un canal OES Pro, 8,6/9,8 Fr x 430 mm, canal de 6,4 Fr, dirección visual de 7°, ocular angulado
WA29048A	Ureteroscopio de un canal OES Pro, 6,4/7,8 Fr x 430 mm, canal de 4,2 Fr, dirección visual de 7°, ocular recto
WA29049A	Ureteroscopio de un canal OES Pro, 6,4/7,8 Fr x 330 mm, canal de 4,2 Fr, dirección visual de 7°, ocular recto
WA02943A	Ureteroscopio de dos canales OES 4000, 7,5 Fr x 430 mm, canales de 2,4 y 3,4 Fr, ocular angulado
WA02944A	Ureteroscopio de dos canales OES 4000, 7,5 Fr x 430 mm, canales de 2,4 y 3,4 Fr, ocular recto
WA02946A	Ureteroscopio de dos canales OES 4000, 7,5 Fr x 330 mm, canales de 2,4 y 3,4 Fr, ocular recto
A5961	Bandeja de instrumentos para el reprocesado de ureteroscopios semirrígidos

Láseres de holmio



Referencia	Descripción
E11K2013000	Sistema láser Solvo de holmio-YAG de 30 vatios (pedal inalámbrico)
E11K2013100	Sistema láser UroPulse de holmio-YAG de 20 vatios (pedal inalámbrico)

Fibras de láser de un solo uso (3,0 m)

Referencia	Descripción
E11DK2013161	Fibra de láser de un solo uso de la serie 200, 3/caja
E11DK2013062	Fibra de láser de un solo uso de 270 micrones, 3/caja
E11DK2013063	Fibra de láser de un solo uso de 400 micrones, 3/caja
E11DK2013064	Fibra de láser de un solo uso de 600micrones, 3/caja
E11DK2013065	Fibra de láser de un solo uso de 1.000 micrones, 3/caja

Fibra de láser reutilizable (3,0 m)

Referencia	Descripción
E11DK2013162	Fibra de láser reutilizable de la serie 200, 3/caja
E11DK2013151	Fibra de láser reutilizable de 270 micrones, 3/caja
E11DK2013152	Fibra de láser reutilizable de 400 micrones, 3/caja
E11DK2013153	Fibra de láser reutilizable de 600 micrones, 3/caja
E11DK2013154	Fibra de láser reutilizable de 1.000 micrones, 3/caja

Accesorios

Referencia	Descripción
E11K2012669	Pelacables para fibra de la serie 200/270
E11K2012670	Pelacables para fibra de 400 micrones
E11K2012671	Pelacables para fibra de 600 micrones
E0497731	Pelacables para fibra de 1.000 micrones
EGB4000325	Cortador de fibra, diamante, esterilizable con ETO
E11DK2011417	Placas de cerámica de cortador de fibra, 5/caja
E0497735	Filtro protector para fibra óptica, ocular de 30 mm
E11K2011816	Gafas protectoras

Litotriptores



Sistema de litotricia ShockPulse-SE

Referencia	Descripción	Cantidad
	Generador (EGSPL-G)	1
	Transductor (EGSPL-T)	1
EGSPL-SR	Cono nasal (EGSPL-NC)	1
	Llave (EGSPL-W)	1
	Estilete de limpieza grande (EGSPL-CSL)	1

Sondas de litotricia ShockPulse-SE estériles de un solo uso

Referencia	Diámetro	Longitud	Cantidad
EGSPL-PDBX376	3,76 mm/11,3 Fr	396 mm	3/caja
EGSPL-PDBX340	3,40 mm/10,2 Fr	396 mm	3/caja
EGSPL-PDBX183	1,83 mm/5,5 Fr	418 mm	3/caja
EGSPL-PDBX150	1,50 mm/4,5 Fr	564 mm	3/caja
EGSPL-PDBX097	0,97 mm/2,91 Fr	578 mm	3/caja

Sondas de litotricia ShockPulse-SE reutilizables

Referencia	Diámetro	Longitud	Cantidad
EGSPL-PR376	3,76 mm/11,3 Fr	396 mm	1/caja
EGSPL-PR340	3,40 mm/10,2 Fr	396 mm	1/caja
EGSPL-PR183	1,83 mm/5,5 Fr	418 mm	1/caja
EGSPL-PR150	1,50 mm/4,5 Fr	564 mm	1/caja
EGSPL-PR097	0,97 mm/2,91 Fr	578 mm	1/caja

Accesorios de litotricia ShockPulse-SE

Referencia	Descripción	Cantidad
EGSPL-T	Transductor	1
EGSPL-NC	Cono nasal	1
EGSPL-W	Llave	1
EGSPL-CSL	Estilete de limpieza grande	1
EGSPL-FS	Pedal	1

Para un set de transductor adicional son necesarios los siguientes accesorios: transductor, cono nasal y llave.

TRATAMIENTO DE CÁLCULOS OLYMPUS



E0492267 · 500 · 01/17 · PR · HB

Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante.

OLYMPUS

OLYMPUS IBERIA S.A.U.

Plaza Europa 29-31, 08908 L'Hospitalet
de Llobregat, Barcelona, España
Tel.: +34 9 02 44 47 04
Fax: +34 9 32 00 95 80
E-mail: oes.marketingendo@olympus.es
www.olympus.es, www.olympus.pt

OLYMPUS LATIN AMERICA, INC.

6100 Blue Lagoon Drive, Suite 390
Miami FL 33126-2087, USA
Tel.: +1 305 260 4244
Fax: +1 305 266 9168
E-mail: cirugia@olympus.com
www.olympusamericalatina.com