


TRATTAMENTO DELLA CALCOLOSI
**UROPASS – GUAINA DI ACCESSO
URETERALE**
Accesso in completa sicurezza.

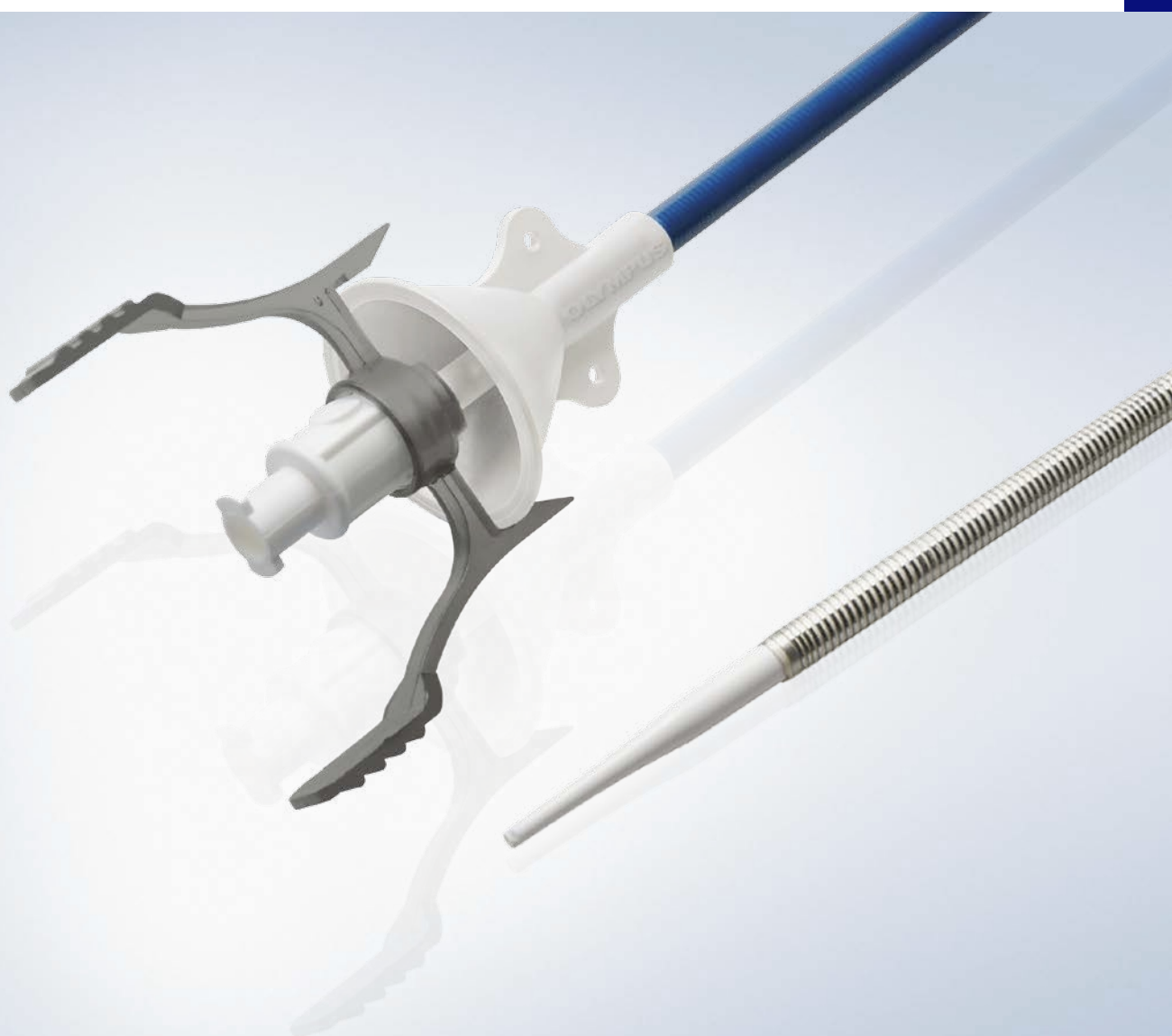


UROPASS – LA SOLUZIONE PER L'ACCESSO URETERALE

L'accesso non dovrebbe mai essere la sfida


La protezione dell'anatomia del paziente non riguarda solo i casi di calcolosi più impegnativi. L'accesso al rene e i passaggi multipli dell'endoscopio possono diventare una complicazione anche nei casi più semplici. L'esperienza ci insegna che utilizzando la guaina di accesso UroPass è possibile raggiungere risultati migliori preservando l'integrità anatomica.

- Gamma completa: sono disponibili diversi diametri da 10/12 a 13/15 Fr.
- Protezione contro pressioni renali elevate durante l'ureteroscopia flessibile.
- Tempi ridotti per la procedura che consentono passaggi multipli dell'endoscopio, pur garantendo la protezione dell'uretere.


Il design brevettato della parte prossimale a imbuto e del meccanismo a clip garantisce il mantenimento in posizione della punta durante il posizionamento

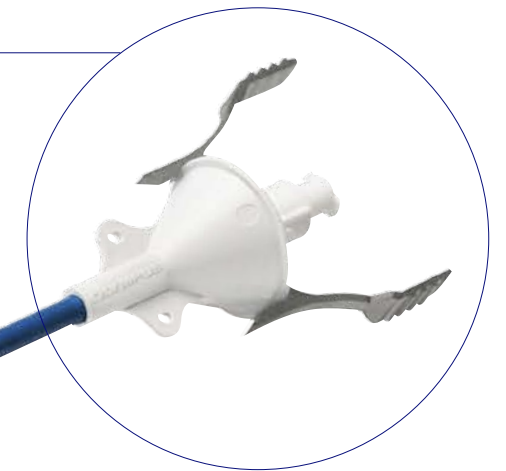

Guaina e punta radiopache offrono una buona visione per il posizionamento

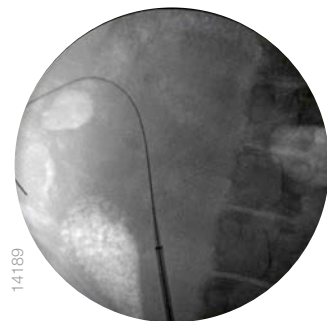


Il rivestimento idrofilico riduce l'attrito e facilita l'inserimento

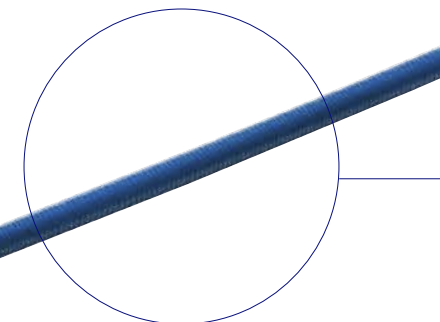

La guaina rinforzata in acciaio impedisce il kinking, per evitare che l'ureteroscopia rimanga bloccato.




Dilatazione atraumatica della punta da 6 a 12 Fr

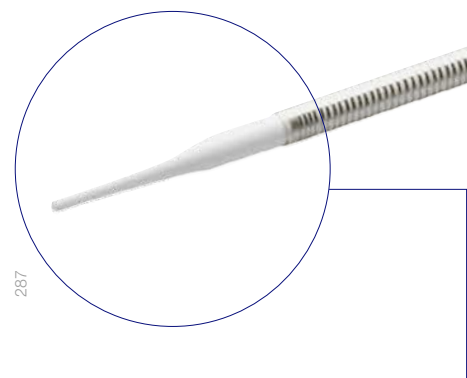

Qualità Olympus per ogni situazione

L'ampia gamma di Guaine di Accesso Ureterale UroPass è stata progettata per essere compatibile con i nostri endoscopi, grazie ad anni di esperienza nell'ambito dell'accesso e della visione endoscopica. La camicia di accesso UroPass e i nostri Endoscopi sono infatti in grado di fornire accessibilità, sicurezza, e il design adeguato per ottenere i migliori risultati.

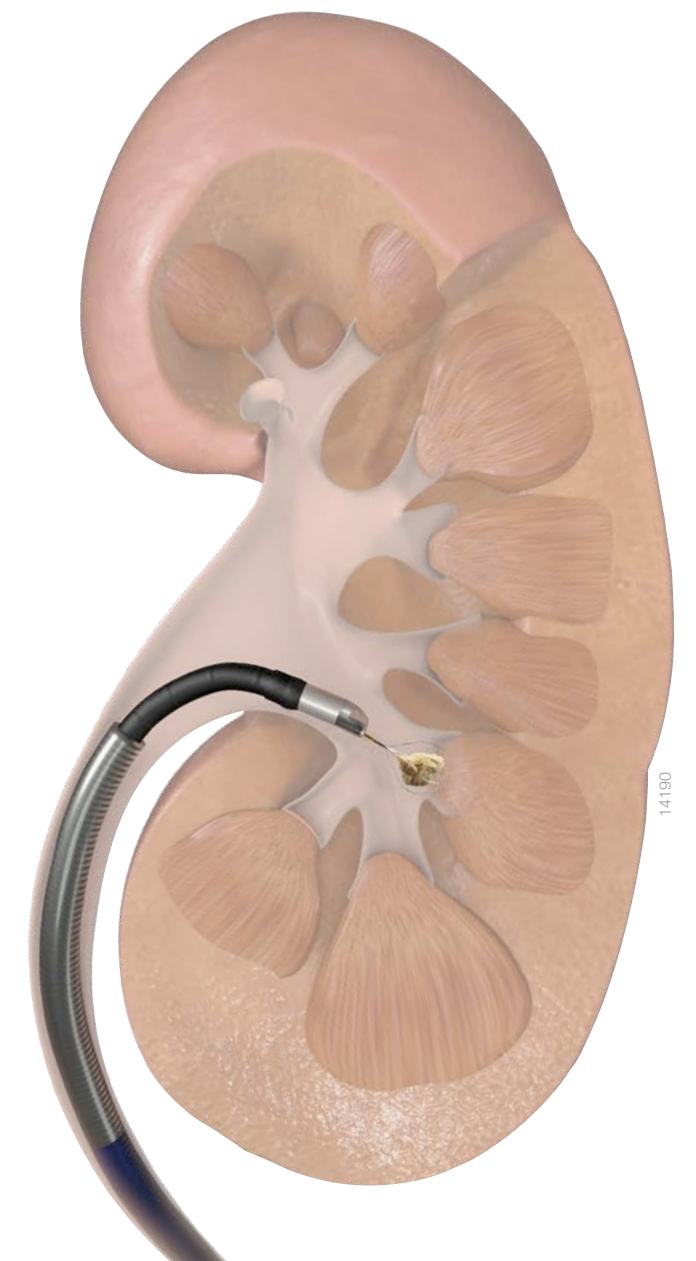

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Guaine di accesso ureterale UroPass			
Codice	Diametro	Lunghezza	Pezzi/confezione
EG61024BX	10/12 Fr	24 cm	5
EG61038BX	10/12 Fr	38 cm	5
EG61046BX	10/12 Fr	46 cm	5
EG61054BX	10/12 Fr	54 cm	5
EG61124BX	11/13 Fr	24 cm	5
EG61138BX	11/13 Fr	38 cm	5
EG61146BX	11/13 Fr	46 cm	5
EG61154BX	11/13 Fr	54 cm	5

Guaine di accesso ureterale UroPass			
Codice	Diametro	Lunghezza	Pezzi/confezione
EG61224BX	12/14 Fr	24 cm	5
EG61238BX	12/14 Fr	38 cm	5
EG61246BX	12/14 Fr	46 cm	5
EG61254BX	12/14 Fr	54 cm	5
EG61324BX	13/15 Fr	24 cm	5
EG61338BX	13/15 Fr	38 cm	5
EG61346BX	13/15 Fr	46 cm	5
EG61354BX	13/15 Fr	54 cm	5

Soluzioni per il trattamento della calcolosi Olympus

URF-V2 – Videoureterorenoscopia ultrasottile da 8,4 Fr



Cestello a quattro fili in Nitinol senza punta Ultra-Catch



Stent Ureterali



URF-P6 – Fibroureterorenoscopia ultrasottile da 7,95 Fr



Irri-Flo II – Pompa di irrigazione per un migliore flusso e un'ottima visione



Fili Guida



Le caratteristiche tecniche, il design e gli accessori sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso o obbligo da parte del produttore.

OLYMPUS

OLYMPUS ITALIA S.R.L.
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI), Italia
Endoscopia Chirurgica
Tel.: +3902269721
Fax: +390226972488
E-mail: infoendosurg@olympus-europa.it
www.olympus.it

OLYMPUS SCHWEIZ AG
Chriesbaumstrasse 6,
8604 Volketswil, Svizzera
Tél.: +41449476681
Fax: +41449476654
E-Mail: endo.ch@olympus.ch
www.olympus.ch

