


## Jederzeit klare Sicht auf die Operationsstelle

InstaClear: Linsenspülsystem zur Reinigung der Optik

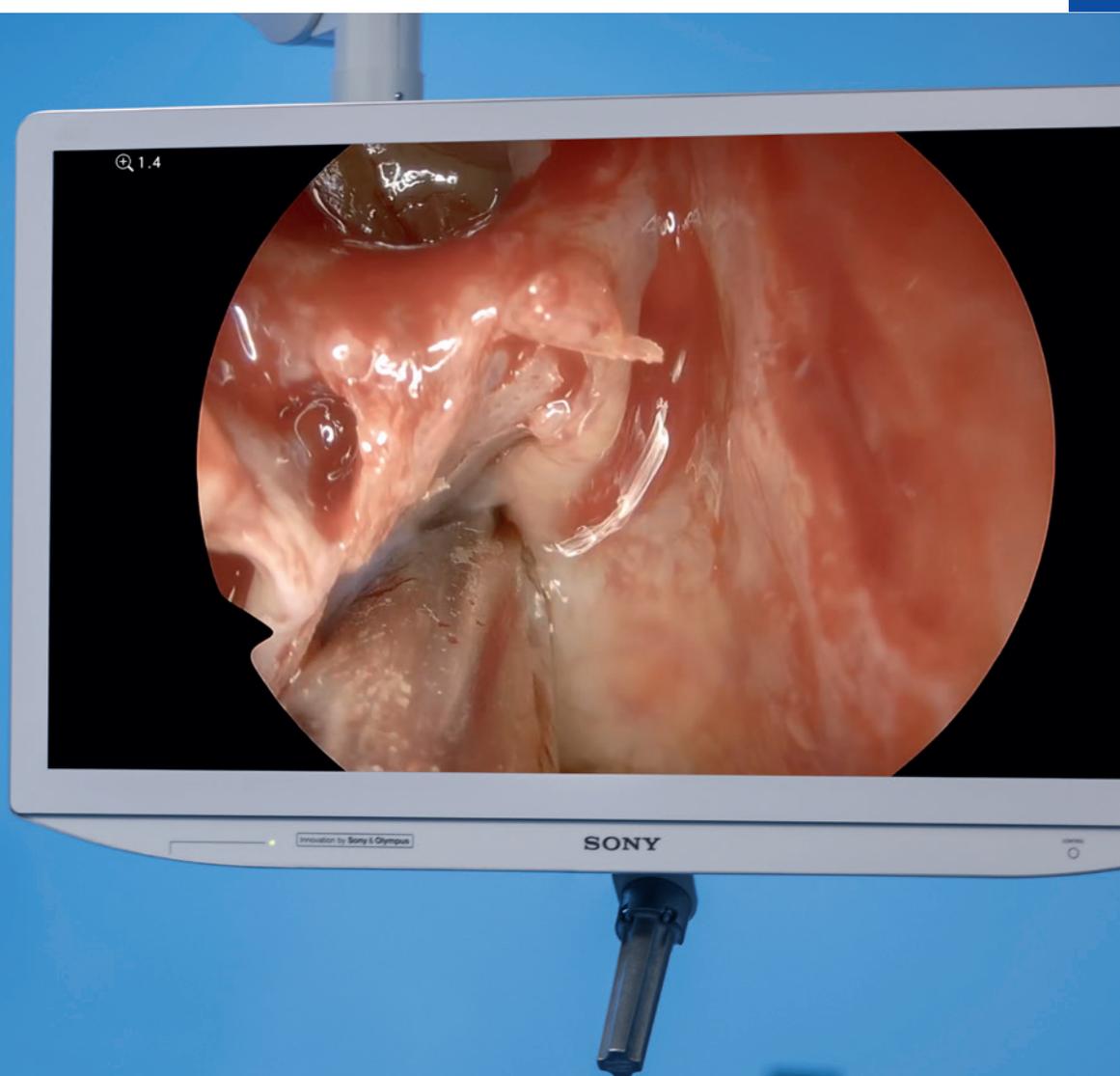

# Klare Sicht, reibungsloser Ablauf

## Sichere und präzise Operationen ohne Unterbrechungen



### Zeiteinsparungen

- Kombiniertes Absaugen und Spülen für eine bessere und schnellere Reinigung der Optik.
- Klare Sicht auf die Operationsstelle zu jeder Zeit.



### Patientensicherheit

- Reinigung ohne Entfernen des Endoskops.
- Design, das die Dauer des Eingriffs verkürzt.



### Flexibilität

- Kompatibilität mit allen 4-mm-HD- und ULTRA-Optiken von Olympus sowie mit den 4-mm-Endoskopen von Storz.
- Arbeitswinkel von 0°, 30°, 45° und 70°.
- Positionierung des Lichtleitkabels oben oder unten.



### Einfache Handhabung

- Fußschalter zur freihändigen Aktivierung.
- Anpassbare Durchflussmenge für benutzerdefinierte Leistung und Spülung der Operationsstelle.

### InstaClear: Die klare Wahl

Das InstaClear Linsenspülsystem reinigt und spült die Linse eines starren Endoskops intraoperativ und nahezu ohne Zeitverzögerung, ohne dass das Endoskop aus der Nasenhöhle entfernt werden muss. Das System umfasst eine Konsole, die zum einfachen Gebrauch und Transport im OP an einem Standard-Infusionsständer montiert werden kann. Hinzu kommen ein Fußschalter, der eine freihändige Aktivierung ermöglicht, ein Schlauchset zur Spülung und Reinigung der Linse, eine Saugfunktion zur Reinigung der Linse und eine Spülfunktion für das Operationsfeld. Darüber hinaus verfügt InstaClear über eine Reihe einfach montierbarer Schäfte, die für 4-mm-HD-Optiken und ULTRA-Optiken von Olympus sowie für starre 4-mm-Endoskope von Storz geeignet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter:

➔ [www.olympus.eu/instaclear](http://www.olympus.eu/instaclear)








Auch für Endoskope mit der Lichtquelle auf der Oberseite verfügbar.



Linsenreinigung und Operationsfeldspülung.

### Für alle Blickwinkel und Lichtleitkabelpositionen geeignet

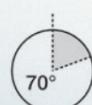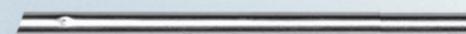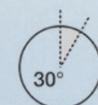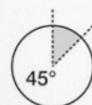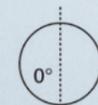

Die InstaClear Konsole kann in Kombination mit dem DIEGO ELITE System oder als autonomes Linsenspülsystem eingesetzt werden.



# Wussten Sie schon ...?

Olympus bietet ein umfassendes Portfolio an „Sehen und Behandeln“-Instrumenten für Rhinologieverfahren in Praxis und OP

Imaging

Behandlung



Olympus behält sich das Recht auf Irrtümer, Änderungen und Ergänzungen der Dienstleistungs- und/oder Produktangebote vor.

**OLYMPUS**

**OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH**  
Wendenstraße 14-18  
20097 Hamburg, Deutschland  
Telefon: +49 40 23773-4777  
Fax: +49 40 23773-503303  
E-Mail: [kundenberatung@olympus.de](mailto:kundenberatung@olympus.de)  
[www.olympus.de](http://www.olympus.de)

**OLYMPUS AUSTRIA GES.M.B.H.**  
Shuttleworthstraße 25  
1210 Wien, Österreich  
Telefon: +43 1 29101-500  
Fax: +43 1 29101-400  
E-Mail: [endoskopie@olympus.at](mailto:endoskopie@olympus.at)  
[www.olympus.at](http://www.olympus.at)

**OLYMPUS SCHWEIZ AG**  
Richtiring 30  
8304 Wallisellen, Schweiz  
Telefon: +41 44 94766-81  
Fax: +41 44 94766-54  
E-Mail: [medical.ch@olympus.ch](mailto:medical.ch@olympus.ch)  
[www.olympus.ch](http://www.olympus.ch)