


Balón de dilatación V de un solo uso (con esfinterotomo)

StoneMaster V

Esfinterotomía y esfinteroplastia con resultados óptimos

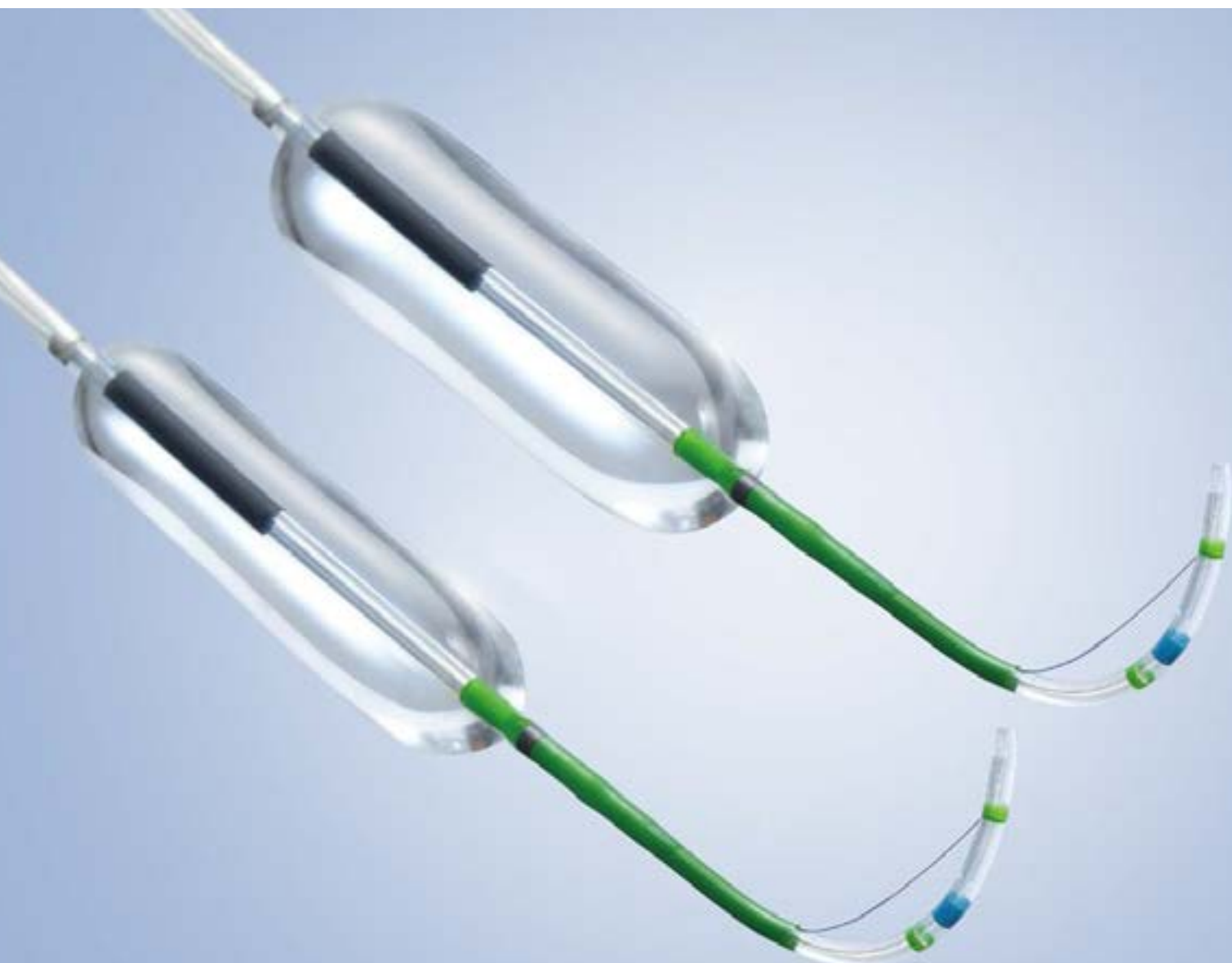

Domine el tratamiento de cálculos complejos

La incorporación de la esfinteroplastia a los procedimientos de extracción de cálculos es cada vez más común para el tratamiento de cálculos grandes en las vías biliares. StoneMaster V permite realizar la esfinterotomía y la esfinteroplastia con un único instrumento endoscópico, y ahorra tiempo ya que evita tener que cambiar de instrumento y simplifica el tratamiento de cálculos.

Orientación estable del esfinterotomo

El extremo distal precurvado del StoneMaster V se extruye en una posición estable orientada hacia las once en punto, lo que reduce los esfuerzos durante la canulación de la papila y garantiza un corte óptimo.

Mayor seguridad gracias al revestimiento CleverCut



El revestimiento CleverCut del extremo proximal del alambre de corte minimiza los daños en el tejido circundante y elimina prácticamente por completo el riesgo de contacto eléctrico entre el alambre y el endoscopio.

Balón multitamaño para dilatación óptima de la papila

El balón integrado multitamaño permite seleccionar de forma continua tres diámetros controlados de dilatación. Los bordes redondeados del balón ofrecen una vista endoscópica clara a través del balón en el tejido dilatado.

Intercambio sencillo de instrumento

StoneMaster V tiene el C-Channel optimizado, lo que permite intercambiar fácilmente de instrumento en técnicas con guía corta o técnicas tradicionales. Este instrumento está diseñado para combinarlo con la gama de guías VisiGlide.

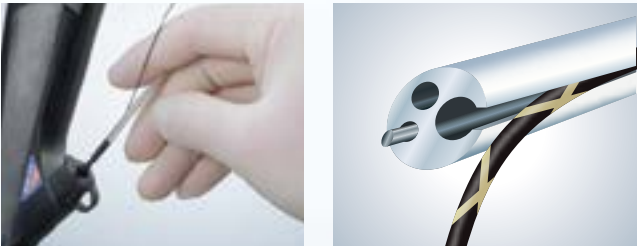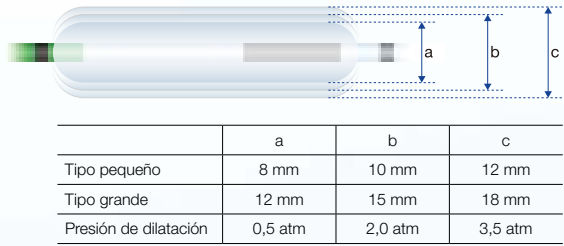

Marcadores endoscópicos

Recubrimiento CleverCut

Marcadores radiopacos


Balón multitamaño

Extremos redondeados del balón

Vaina con C-Channel

Marcadores radiopacos

Marcador del centro endoscópico del balón de dilatación

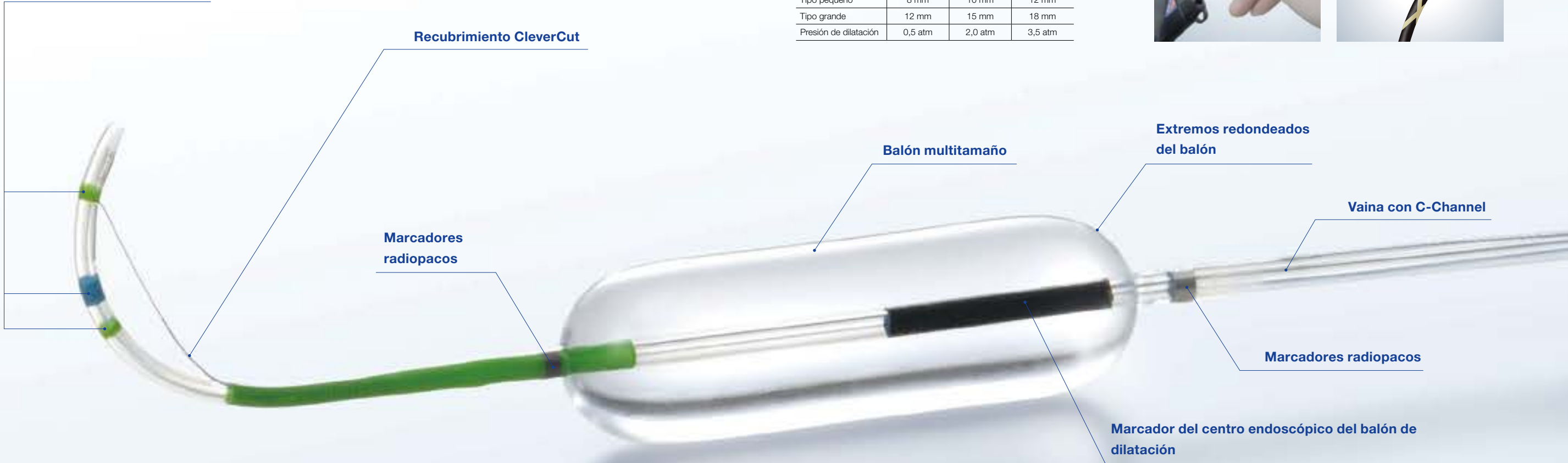

StoneMaster V



Extracción de cálculos biliares complejos

Las directrices actuales de la ESGE recomiendan realizar una esfinterotomía endoscópica seguida de una dilatación papilar endoscópica con balón de dilatación para extraer determinados cálculos biliares complejos. Se considera que este planteamiento da lugar a unas tasas similares de pancreatitis posterior a la CPRE y reduce la hemorragia y las complicaciones en comparación con la esfinterotomía endoscópica por sí sola*.

*Dumonceau et al., "Prophylaxis of post-ERCP pancreatitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline - Updated June 2014"; Endoscopy 2014; 46:799-815.

Especificaciones

	Tipo grande (12-15-18)			Tipo pequeño (8-10-12)		
Nombre del producto	BD-VC431Q-1840-20	BD-VG431Q-1840-25	BD-VC431Q-1840-30	BD-VC431Q-1240-20	BD-VG431Q-1240-25	BD-VC431Q-1240-30
Referencia	N5400030	N5400130	N5400230	N6010930	N6011030	N6011130
Longitud del alambre de corte (mm)	20 mm	25 mm	30 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Longitud de la punta distal (mm)	7 mm					
Tamaño de la punta distal (Fr)	4,4 Fr					
Longitud de trabajo (mm)	1950 mm					
Diámetro del balón (mm)	12-15-18 mm			8-10-12 mm		
Diámetro del balón (Fr)	36-45-54 Fr			24-30-36 Fr		
Presión de dilatación (atm)	0,5-2,0-3,5 atm			0,5-2,0-3,5 atm		
Longitud del balón (mm)	40 mm					



EndoTherapy de Olympus

Asistencia especializada más allá de los productos

En Olympus, nos esforzamos por ser más que un mero proveedor de equipos médicos para nuestros clientes. Ofrecemos asistencia de principio a fin, desde el proceso de compra al procedimiento y los servicios de reprocesado, con el fin de forjar una relación de confianza.



Página Showroom de CPRE

Entre en el mundo de la CPRE en nuestro sitio web de Olympus para ver un resumen completo de nuestra gama de productos, valioso contenido en vídeo, información sobre cursos de formación y mucho más.

www.olympus.es/ercp



Formación

Regístrese aquí para mejorar sus habilidades en procedimientos, así como el uso seguro y eficiente de los productos Olympus.

www.olympus.eu/training



Gama

Explore la variada gama de dispositivos EndoTherapy aquí.

www.olympus.eu/et-catalog



Servicios

Póngase en contacto ahora con su representante de ventas para recibir atención individual.

Dado que los conocimientos médicos aumentan constantemente, es posible que se produzcan cambios o modificaciones técnicas en el diseño del producto, las especificaciones del producto, los accesorios y ofertas de servicios.