

Effizienz und Vielfalt


DIEGO ELITE – das Shaver-System von Olympus für die Rhinologie



DIEGO ELITE Multidebrider

Effizienz – zur Verbesserung der chirurgischen Praxis

Der DIEGO ELITE Multidebrider ist ein Mehrzweck-Shaver-System für die HNO, das Chirurgen eine größere Auswahl an Optionen zur Durchführung von Operationen bietet und gleichzeitig die chirurgische Effizienz erhöht.

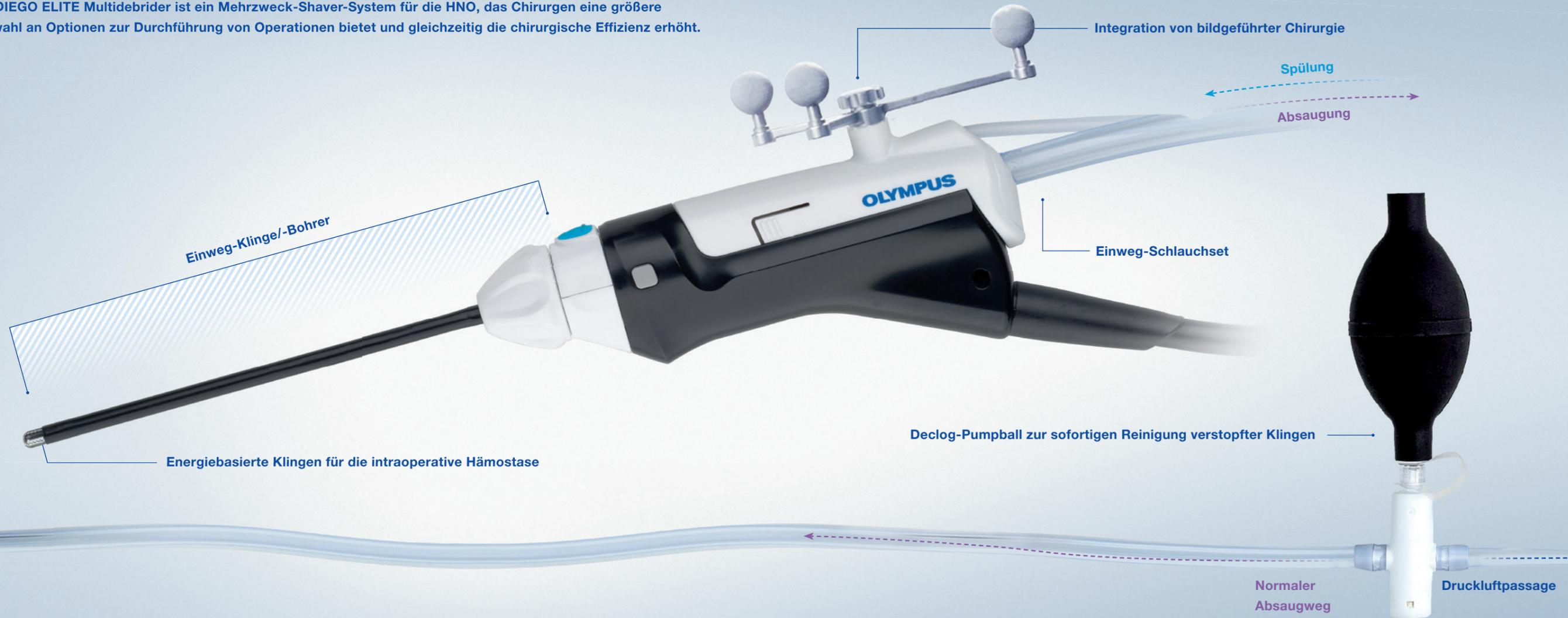

Das System im Überblick

Touchscreen-Konsole

- Intuitive und einfache Bedienung.
- Erkennung der Klingen-ID mit vordefinierter optimaler Einstellung.
- Dediziertes Absaugmodul.



Wiederverwendbare Handstücke

- Wahlweise gerade oder abgewinkelt.
- Komfortable und ergonomische Handhabung.
- Autoklavierbar.



Absaugschläuche

- Komplet für den Einmalgebrauch ausgelegter Absaugweg.
- Declog-Absaugschlauch zur sofortigen Reinigung verstopfter Klingen.



Toggle Stop

- Klingenfenster lässt sich mit einer Bewegung vollständig öffnen oder schließen.
- Mehr Effizienz.





Vielfalt – verschiedene Arten der chirurgischen Durchführung

Klingen-Portfolio

Der DIEGO ELITE Multidebrider bietet dem Chirurgen mehrere Möglichkeiten zur Durchführung chirurgischer Eingriffe. Dazu gehören die Auswahl zweier Handgriffstypen, ein umfangreiches Sortiment an Klingen und Bohrern sowie ein Standard- und ein Declog-Schlauchset.

Standardklingen

Mit oder ohne distale Absaugung zur standardmäßigen Weichgewebeerntfernung in der Nasenanatomie.



Klingen Typ A

Zur fortschrittlichen Resektion.



Energiebasierte Klingen

Bipolare und monopolare energiebasierte Klingen zur sofortigen intraoperativen Hämostase mit oder ohne distale Absaugung.



Abgewinkelte Klingen

Verschiedene Winkel, inkl. 0°, 15°, 60°, 75° und 90°.



Rotierende Klingen: Vorteil

Der Chirurg erreicht unterschiedliche Bereiche der Nasenanatomie, ohne das Handstück drehen zu müssen.



Klingen für die Nasenmuscheln

2-mm-Klingen für die Nasenmuscheln zur fortschrittlichen Resektion, auch als bipolare Option erhältlich.



Bohrer-Portfolio

Das DIEGO ELITE System bietet eine umfassende Auswahl an Bohrern für fortschrittliche FESS-Prozeduren.

Diamantbohrer, Patronenform

Auswahl an Diamantbohrern mit Patronenform zur schonenden Entfernung von Knochen- und Knorpelstrukturen. Mit verschiedenen Abwinkelungen erhältlich.



Diamantbohrer, konisch

Auswahl an konischen Diamantbohrern zur Vergrößerung von Öffnungen und zur Entfernung von Knochen und Knorpel, insbesondere von hinten nach vorn für eine bessere Sicht. Mit verschiedenen Abwinkelungen erhältlich.



Diamant-Kugelbohrer

Diamantbohrer zur Entfernung feiner Knochen- und Knorpelstrukturen. Mit verschiedenen Abwinkelungen erhältlich.



Gerillter Bohrer, fassförmig

Auswahl an Schneidbohrern zur Entfernung anspruchsvollerer Knochen- und Knorpelstrukturen. Mit verschiedenen Abwinkelungen erhältlich.



Abgewinkelte Bohrer

Das gesamte Bohrer-Sortiment ist mit verschiedenen Winkeln einschließlich 15°, 60° und 70° erhältlich.



Über die funktionelle endoskopische Nasennebenhöhlen-Chirurgie (FESS) hinaus

Tonsillen- und Adenoidklingen

Für die Tonsillen- und Adenoidresektion steht ein breites Spektrum an biegsamen Klingen zur Verfügung. Zur Stabilisierung des Adenoidbettes und zur Kauterisierung sind bipolare und monopolare Optionen erhältlich.



Larynx-Klingen

Zur Entfernung von Larynxläsionen und zum Tumor-Debulking. Verfügbar als 2,9-mm- und 4-mm-Ausführung mit 22 cm Länge für den subglottischen/oberen Trachealbereich oder mit 27 cm Länge für glottische/supraglottische Anwendungen.



Wussten Sie schon ...?

Olympus bietet ein umfassendes Portfolio an „Sehen und Behandeln“-Instrumenten für Rhinologieverfahren in Praxis und OP

Imaging

Behandlung



Olympus behält sich das Recht auf Irrtümer, Änderungen und Ergänzungen der Dienstleistungs- und/oder Produktangebote vor.

OLYMPUS

OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH

Wendenstraße 14-18
20097 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 23773-4777
Fax: +49 40 23773-503303
E-Mail: kundenberatung@olympus.de
www.olympus.de

OLYMPUS AUSTRIA GES.M.B.H.

Shuttleworthstraße 25
1210 Wien, Österreich
Telefon: +43 1 29101-500
Fax: +43 1 29101-400
E-Mail: endoskopie@olympus.at
www.olympus.at

OLYMPUS SCHWEIZ AG

Richtiring 30
8304 Wallisellen, Schweiz
Telefon: +41 44 94766-81
Fax: +41 44 94766-54
E-Mail: medical.ch@olympus.ch
www.olympus.ch