

VIDEOCOLONOSCOPIO EVIS EXERA III

PCF-H190TL/I


Colonoscopio de alta definición que facilita el tratamiento endoscópico gracias a su excelente maniobrabilidad



Características principales

Angulación corta para un mejor acceso a las lesiones

Gracias a su sección de curvado más corta, el PCF-H190TL/I hace posible un mejor manejo en el intestino. Combinado con la angulación hacia arriba de 210°, el endoscopio ofrece un acceso más fácil a las lesiones.

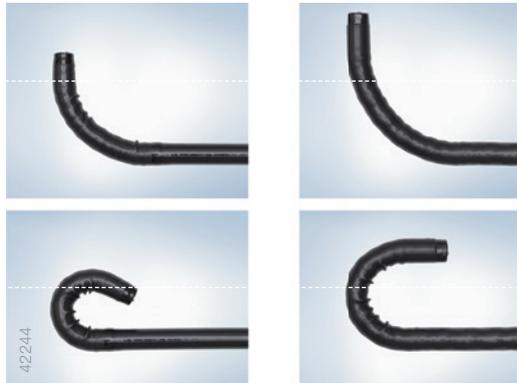


PCF-H190TL/I

PCF-H190L/I

Salida del canal de trabajo apropiada


El diseño permite el manejo sencillo de la función de inyección de agua al mismo tiempo que se realiza cualquier tratamiento, como puede ser detener una hemorragia.

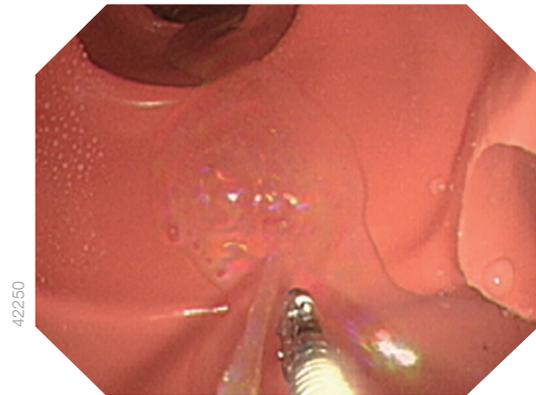

42250

HDTV y NBI

El PCF-H190TL/I ayuda a conseguir una mayor precisión en los tratamientos gracias a su calidad de imagen HDTV y NBI más brillante. El diagnóstico óptico facilita la toma de decisiones sobre los tratamientos adecuados y la delineación precisa de las lesiones.

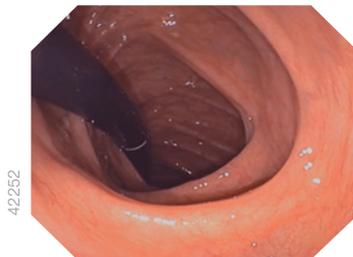

42262

Luz blanca

Mejor inserción

El PCF-H190TL/I incorpora tecnologías exclusivas de Olympus que facilitan la inserción del endoscopio, lo que resulta en una mayor comodidad para el paciente.



42248

Videocolonoscopio OLYMPUS EVIS EXERA III PCF-H190TL/I

Especificaciones

Sistema óptico	Campo de visión (ángulo diagonal máximo)	140°	
	Dirección visual	0° (visión frontal)	
	Profundidad de campo	2-100 mm	
	Diámetro exterior del extremo distal	9,8 mm	
Sección de inserción	Extremo distal ampliado		
		Orificio del canal de trabajo	
		Diámetro exterior del tubo de inserción	10,5 mm
		Longitud de trabajo	L: 1680 mm, I: 1330 mm
Canal de trabajo	Diámetro interior del canal	3,2 mm	
	Distancia mínima visible	4 mm respecto del extremo distal	
Canal de trabajo	Dirección desde la que se introducen los accesorios EndoTherapy y salen en la imagen endoscópica		
Inyección de agua	Dirección de la inyección de agua en el campo de visión		
Sección de curvado	Rango de angulación	Arriba: 210°	
		Abajo: 180°	
		Derecho: 160°	
		Izquierdo: 160°	
Longitud total	L: 2005 mm, I: 1655 mm		
Sistema EVIS EXERA III compatible	Procesador de vídeo OLYMPUS CV-190		
	Fuente de luz de xenón OLYMPUS CLV-190		

Dado que los conocimientos médicos aumentan constantemente, es posible que se produzcan cambios o modificaciones técnicas en el diseño del producto, las especificaciones del producto, los accesorios y ofertas de servicios.