


Dilatatore a palloncino monouso V (con sfinterotomo)

StoneMaster V

Ottimizzazione delle prestazioni nei campi della sfinterotomia e sfinteroplastica

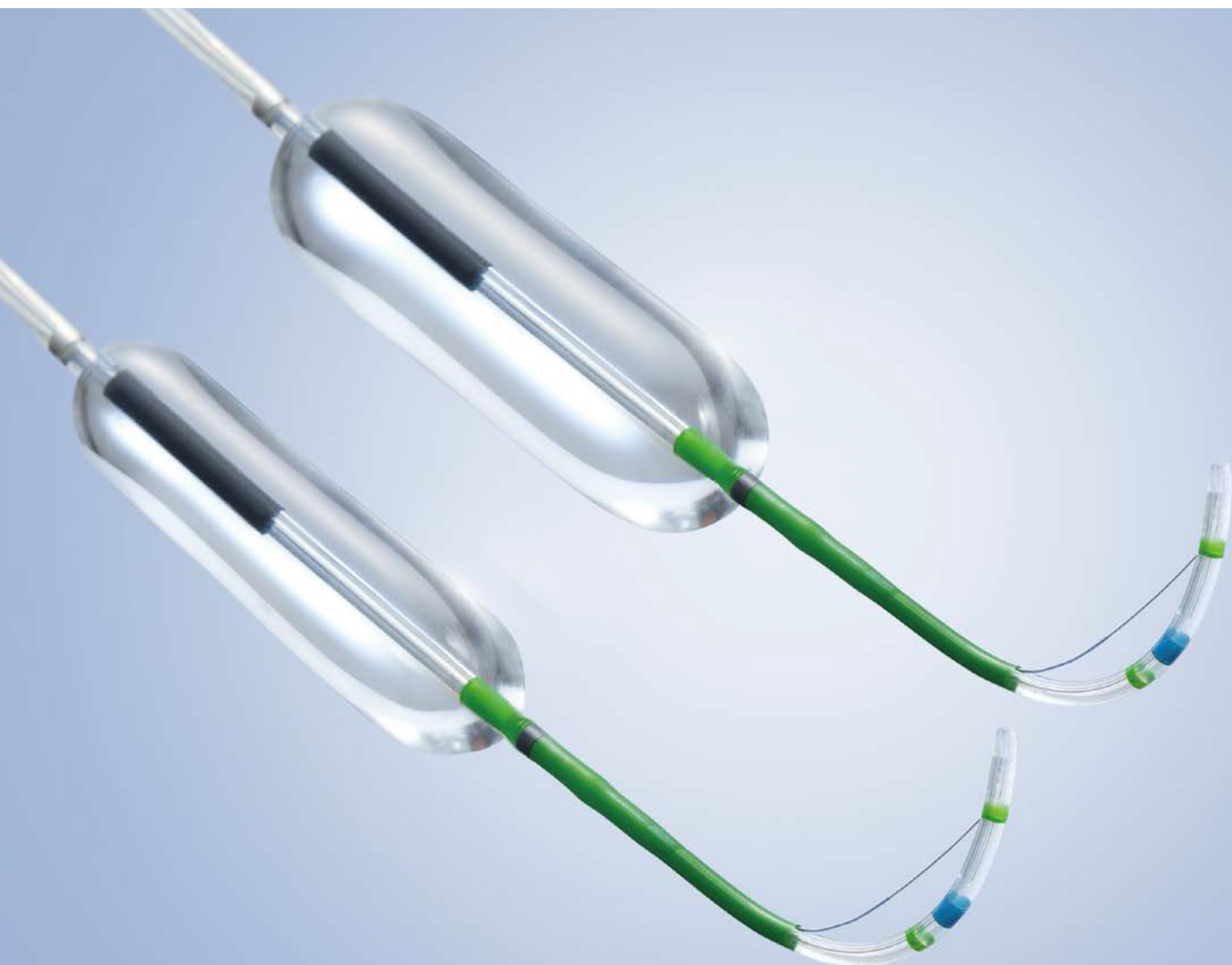

Perfeziona il trattamento della calcolosi difficile

È ormai sempre più comune aggiungere la sfinteroplastica alle procedure di estrazione dei calcoli per il trattamento di calcoli di grosse dimensioni nel dotto biliare. StoneMasterV combina i due passaggi della sfinterotomia e sfinteroplastica in un unico dispositivo endoscopico, eliminando la necessità di cambiare dispositivo e semplificando il trattamento dei calcoli.

Orientamento stabile del bisturi

Il terminale distale pre-curvato di StoneMasterV fuoriesce e rimane stabile in una posizione "ore 11", riducendo gli sforzi dell'incannulazione della papilla e garantendo un taglio ottimizzato.

La guaina di rivestimento CleverCut aumenta la sicurezza

Il rivestimento CleverCut del terminale prossimale del filo di taglio minimizza i danni ai tessuti circostanti, eliminando quasi del tutto qualsiasi pericolo di contatto elettrico tra il filo metallico e l'endoscopio.

Palloncino espandibile a diverse dimensioni per una dilatazione ottimale della papilla

Il palloncino integrato espandibile a diverse dimensioni può essere impostato in qualsiasi momento su tre diametri di dilatazione controllati. I margini arrotondati del palloncino consentono una vista endoscopica chiara attraverso il palloncino e sul tessuto dilatato.

	a	b	c
Piccolo	8 mm	10 mm	12 mm
Grande	12 mm	15 mm	18 mm
Pressione di dilatazione	0,5 atm	2,0 atm	3,5 atm

Cambio di dispositivo semplificato

StoneMasterV ottimizzato per il canale a C supporta il cambio di dispositivo per le tecniche con filo guida corto o la tradizionale over-the-wire. Progettato per l'uso con VisiGlide.



Marker endoscopici

Guaina di rivestimento CleverCut

Marker radiopachi

Palloncino espandibile a diverse dimensioni

Estremità del palloncino arrotondate

Guaina canale a C

Marker radiopachi

Marker centrale endoscopico del palloncino dilatatore

StoneMaster V



Estrazione di calcoli biliari difficili

Le correnti linee guida ESGE per l'estrazione di calcoli biliari particolarmente difficili suggeriscono l'esecuzione di una sfinterotomia seguita da una dilatazione endoscopica della papilla con palloncino di grandi dimensioni. Rispetto alla sola sfinterotomia endoscopica, si ritiene che tale approccio mostri tassi simili di pancreatite post-ERCP e un rischio minore di emorragia e complicanze generali.*

*Dumonceau et al., "Prophylaxis of post-ERCP pancreatitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline - Updated June 2014"; Endoscopy 2014; 46:799-815.

Specifiche

	Grande(12-15-18)			Piccolo(8-10-12)		
Codice prodotto	BD-VC431Q-1840-20	BD-VG431Q-1840-25	BD-VC431Q-1840-30	BD-VC431Q-1240-20	BD-VG431Q-1240-25	BD-VC431Q-1240-30
Modello	N5400030	N5400130	N5400230	N6010930	N6011030	N6011130
Lunghezza del filo di taglio (mm)	20 mm	25 mm	30 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Lunghezza del puntale distale (mm)	7 mm					
Dimensione del puntale distale (Fr)	4,4 Fr					
Lunghezza operativa (mm)	1950 mm					
Diametro del palloncino (mm)	12-15-18 mm			8-10-12 mm		
Diametro del palloncino (Fr)	36-45-54 Fr			24-30-36 Fr		
Pressione di dilatazione (atm)	0,5-2,0-3,5 atm			0,5-2,0-3,5 atm		
Lunghezza del palloncino (mm)	40 mm					



Olympus EndoTherapy

Un supporto dedicato che va oltre i prodotti

In Olympus ci impegniamo per essere molto più di un semplice fornitore di strumentazione medica per i nostri clienti. Forniamo assistenza completa, dal processo di acquisto alle procedure e ai servizi di decontaminazione, per costruire un rapporto di fiducia.



Pagina showroom ERCP

Entra nel mondo della ERCP sul sito web di Olympus: panoramica completa del nostro portfolio prodotti, contenuti video interessanti, informazioni sulla formazione e molto altro.

> www.olympus.eu/ercp-procedure



Formazione

Registrati qui per migliorare le tue abilità per le procedure e l'uso sicuro ed efficace dei prodotti Olympus.

> www.olympus.eu/training



Portfolio

Esplora l'ampio portfolio di dispositivi EndoTherapy qui.

> www.olympus.eu/et-catalog



Assistenza

Contatta il tuo rappresentante vendite Olympus per un'assistenza personalizzata.

Considerata la costante evoluzione delle conoscenze mediche, possono essere necessarie modifiche tecniche o variazioni del design del prodotto, delle specifiche del prodotto, degli accessori e delle offerte di servizi.

OLYMPUS

OLYMPUS ITALIA S.R.L.
Via Modigliani 45, 20090 Segrate (MI), Italia
Telefono: +39 02 26 97 21, Fax: 39 02 26 97 24 88
E-mail: olympus.italia@olympus-europa.com
www.olympus.it

OLYMPUS SCHWEIZ AG
Richtiring 30, 8304 Wallisellen, Svizzera
Telefon: +41 44 94766-81, Fax: +41 44 94766-54
E-Mail: medical.ch@olympus.ch
www.olympus.ch