

Gastroskop

GIF-1100

Smuklejsza konstrukcja i wyjątkowa wyrazistość obrazu







Smuklejsza konstrukcja i wyjątkowa wyrazistość obrazu

Smuklejsza konstrukcja

Zmniejszona średnica części wprowadzanej endoskopu GIF-1100 do 8,9 mm ułatwia wprowadzanie i redukuje dyskomfort pacjenta bez uszczerbku na wydajności. Nawet mimo nowej, cieńszej konstrukcji GIF-1100 oferuje takie funkcje, jak bliska głębia ostrości od 2 mm, poza tym posiada kanał roboczy o szerokości 2,8 mm z funkcją strumienia wody w celu zapewnienia skutecznej obserwacji i możliwości leczenia.

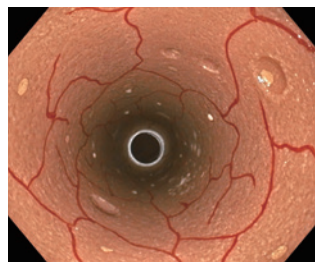


TXI

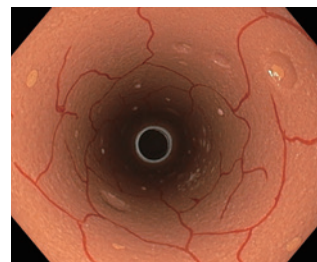

Białe światło

Lepsza jakość obrazu i innowacyjny tryb obserwacji z CV-1500

Gdy GIF-1100 jest połączony z procesorem wideo CV-1500, źródło światła procesora złożone z 5 diod LED oferuje innowacyjne tryby obserwacji —TXI (obrazowanie z ulepszeniem tekstury i koloru), RDI (czerwone obrazowanie dichromatyczne) i NBI (obrazowanie wąskopasmowe), a system redukcji szumów umożliwia wyraźną obserwację z mniejszym szumem.

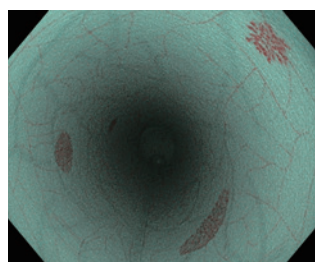

NBI

ErgoGrip

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt zapewnia wygodny i stabilny chwyt, mniejszą masę i łatwiejszy dostęp do pokręteł regulacji odchylenia i przełączników endoskopu.



Łatwy dostęp do zdalnego przełącznika 2

Łatwy dostęp do pokręteł regulacji odchylenia

Inne cechy

- Bliska głębia ostrości · WaterJet
- Wodoodporne złącze One-touch

Dane techniczne			
System optyczny	Pole widzenia	140°	
	Kierunek widzenia	Widok do przodu	
	Głębina ostrości	2–100	
Część wprowadzana	Średnica zewnętrzna końca dystalnego	ø 8,9 mm	
	Powiększenie końca dystalnego		
Kanał roboczy	Średnica zewnętrzna przewodu części wprowadzanej	ø 8,9 mm	
	Długość robocza	1030 mm	
	Wewnętrzna średnica kanału	ø 2,8 mm	
	Minimalna widzialna odległość*1	3 mm od końca dystalnego	
Pomocniczy kanał wody	Kierunek, z którego akcesoria do endoterapii są wprowadzane i wycofywane z obszaru obrazu endoskopowego		
	Kierunek, z którego w obrazie endoskopowym pojawia się strumień wody		
Część ruchoma	Zakres odchylenia	W górę 210° / W dół 90° / W prawo 100° / W lewo 100°	
Długość całkowita	1350 mm		
System kompatybilny	Procesor wideo OLYMPUS CV-1500		
	Procesor wideo OLYMPUS CV-190/CV-190 Plus		
	Źródło światła ksenonowego OLYMPUS CLV-190		

*1 Odległość od dystalnego końca endoskopu.



GASTROSKOP OLYMPUS GIF-1100

Firma Olympus zastrzega sobie prawo do błędów, modyfikacji i zmian w ofercie usług i/lub produktów.