

# OLYMPUS

Your Vision, Our Future

## VISERA ELITE II

TESTA DI TELECAMERA FULL HD 3 CMOS

# CH-S200-XZ-EB

Compatta e leggera



## 3 Sensori CMOS

· Ampia gamma dei colori e arricchita riproducibilità degli stessi in full HD

## Osservazione con luce speciale

· Selezionare osservazione NBI e due modalità di osservazione IR con un solo pulsante del telecomando

## Piccola, compatta e leggera

· Si adatta facilmente alla mano e offre manovrabilità

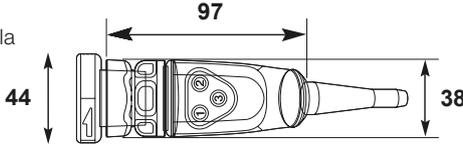
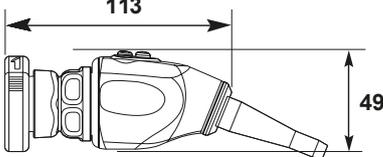
## Zoom ottico con messa a fuoco 2x

· Osservazione ingrandita senza deterioramento della qualità dell'immagine

## Modalità "Fibra"

· Previene l'effetto moiré causato dalla combinazione della testa della telecamera e un fibroscopio

### Specifiche

<b>Dimensioni</b>	Dimensioni della testa della telecamera (unità: mm)		
	Peso della testa della telecamera	220 g	
	Cavo	ø 6,8 mm x 3 m	
<b>Osservazione</b>	Sistema di rilevamento	Sensore immagine CMOS x 3	
	Rapporto di ingrandimento	Lunghezza focale f = da 15,9 a 31,3 mm	
<b>Modalità osservazione NBI*</b>		Disponibile	
<b>Modalità osservazione ottica IR*</b>		Disponibile	
<b>Funzione otturatore elettronico*</b>		Disponibile	
<b>Funzione zoom elettronico*</b>		Disponibile	
<b>Pulizia/disinfezione Sterilizzazione</b>	Pulizia/disinfezione	Immergibile in soluzione disinfettante	
	Sterilizzazione	STERRAD 100S (ciclo breve) 100NX (ciclo doppio) NX (ciclo standard) V-PRO maX (ciclo senza lumen)	
<b>Classificazione (strumentazione elettromedicale)</b>	Tipo di protezione da shock elettrico	TIPO BF	
	Grado di protezione da esplosione	La testa della telecamera deve essere tenuta lontano da gas infiammabili	

\* Per ulteriori dettagli, consultare il manuale di istruzioni del videoprocessore.

Le caratteristiche tecniche, il design e gli accessori sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso o obbligo da parte del produttore.