

EVIS LUCERA ELITE Videogastroskop

GIF-H290T

Ein neuer Standard für hochauflösende Gastroskope mit noch
besserer Manövrierbarkeit und Bedienbarkeit



Hauptmerkmale

Verbesserter Zugang zur Läsion

Der Abwärtswinkel des GIF-H290T wurde von konventionellen 90° auf 120° vergrößert. Darüber hinaus wurde der Bewegungsradius bei der Aufwärtsabwinkelung nach links und nach rechts erweitert. Durch diesen größeren Abwinkelungsbereich erleichtert das Gastroskop den Zugang zu Läsionen.

*Vorgängerprodukt: EVIS LUCERA VIDEOGASTROSKOP OLYMPUS GIF-Q260J



*Die weiße Linie zeigt die Richtung an, in die die Zange herausragt


HD-Bilder für eine komfortable Behandlung

Das Gastroskop ist mit einem hochauflösenden CCD ausgestattet und liefert HD-Bilder in hoher Auflösung, die zu einer Verbesserung der Behandlungsgenauigkeit beitragen können.



Für eine schnelle Hämostase

Das GIF-H290T zeichnet sich durch eine verbesserte Position des Hilfsspülkanals in der Nähe des Instrumentierkanals aus und sorgt so für eine reibungslose Anwendung. Die Zufuhr des Wassers nah am Instrument unterstützt die Hämostase, ohne dass die Position des Endoskops geändert werden muss.

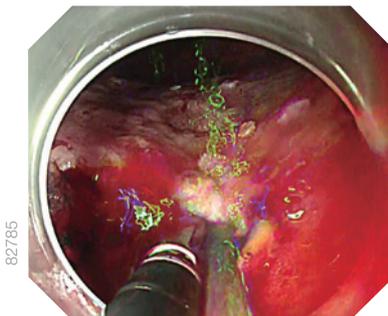

EVIS LUCERA ELITE VIDEOGASTROSKOP OLYMPUS GIF-H290T

Spezifikationen

Optisches System	Sichtfeld	140°
	Blickrichtung	0° (Geradeaus)
	Tiefenschärfe	3–100 mm
Außendurchmesser Distalende 9,8 mm		
Distalende vergrößert		
Einführteil	Objektiv	oben
	Luft-/Wasserdüse	rechts
	Lichtleiterlinse	links
	Hilfsspülkanal	unten
		Öffnung Arbeitskanal
	Außendurchmesser des Einführschlauchs	9,9 mm
	Arbeitslänge	1030 mm

Instrumentierkanal	Kanal-Innendurchmesser	3,2 mm
	Mindestsichtabstand*1	3 mm
	Aus dieser Richtung treten die Endotherapie-Instrumente ins Bild ein und wieder aus	
Luft-/Wasser-Druckknopf	Luftstromrate*2	30 cm³/s
Abwinkelungsteil	Abwinkelungsbereich	Oben 210°/unten 120° Rechts 100°/links 100°
Gesamtlänge		1350 mm
Kompatibles EVIS LUCERA SYSTEM	Videoprozessor OLYMPUS CV-290 Xenon-Lichtquelle OLYMPUS CLV-290SL, CLV-290	

*1 Abstand vom Distalende des Endoskops.

*2 Standard bei Verwendung der CLV-290SL (hoher Luftdruck).

Olympus behält sich das Recht auf Irrtümer, Änderungen und Ergänzungen der Dienstleistungs- und/oder Produktangebote vor.