

## MAJ-1878

## Aumente las capacidades de su sistema ScopeGuide.

# SONDA DE MARCADO DE POSICIÓN DE ENDOSCOPIOS

**Visualización tridimensional clara con todos los colonoscopios.**

## Mayor velocidad de succión

Gracias a su diseño más fino, la succión es tres veces más rápida que con el modelo anterior (sonda de detección de posición) al acoplarla a un endoscopio con un canal de trabajo de 3,2 mm.

## Compatibilidad con endoscopios PCF y SIF




Dado que esta sonda se puede combinar con un endoscopio con un canal de trabajo de 2,8 mm o superior, resulta compatible con los enteroscopios (SIF) y mantiene la compatibilidad con los colonoscopios PCF.

## Vida útil más prolongada

Es al menos cinco veces más duradero que el modelo anterior (según pruebas de calidad y de verificación interna).

## Visualización tridimensional clara del tubo de inserción del endoscopio

La inserción de la sonda en el canal de trabajo del endoscopio permite un seguimiento en 3D y en tiempo real de la posición del endoscopio con el sistema ScopeGuide, lo que le ayudará a gestionar los bucles de forma más efectiva.

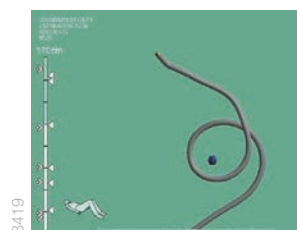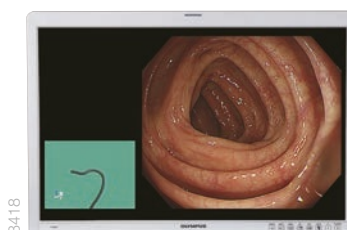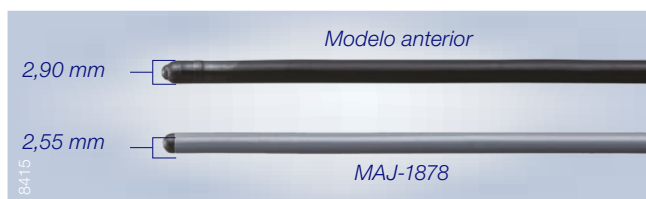

## Especificaciones

### Tamaño

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Diámetro máximo de la porción de inserción | 2,55 mm  |
| Longitud de trabajo                        | 3.500 mm |
| Longitud de detección                      | 940 mm   |

### Endoscopios Olympus compatibles


(deben cumplirse todos estos requisitos)

|                                                          |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                                   | CF, PCF y SIF<br>(excepto los endoscopios con uña elevadora o función de detección de la posición) |
| Diámetro interior del canal de trabajo (código de color) | 2,8 mm o mayor<br>2,8 mm o 3,2 mm (amarillo)<br>3,7 mm o 4,2 mm (naranja)                          |

### Unidades de detección de posición de endoscopios Olympus compatibles

UPD y UPD-3

## Diagrama del sistema

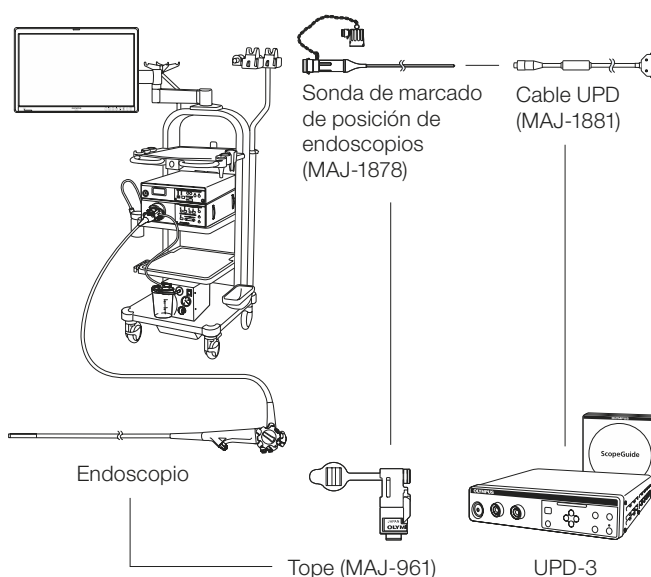

Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante.

**OLYMPUS**

**OLYMPUS IBERIA S.A.U.**  
Plaza Europa 29-31, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España  
Tel.: +34 9 02 44 47 04  
Fax: +34 9 32 00 95 80  
E-mail: oes.marketingendo@olympus.es  
www.olympus.es, www.olympus.pt

**OLYMPUS LATIN AMERICA, INC.**  
6100 Blue Lagoon Drive, Suite 390  
Miami FL 33126-2087, USA  
Tel.: +1 305 260 4244  
Fax: +1 305 266 9168  
E-mail: cirugia@olympus.com  
www.olympusamericalatina.com