


STEINBEHANDLUNG

No-Tip Nitinol-Körbchen

Flex-Catch, Ultra-Catch und X-Catch – für die zuverlässige Steinentfernung

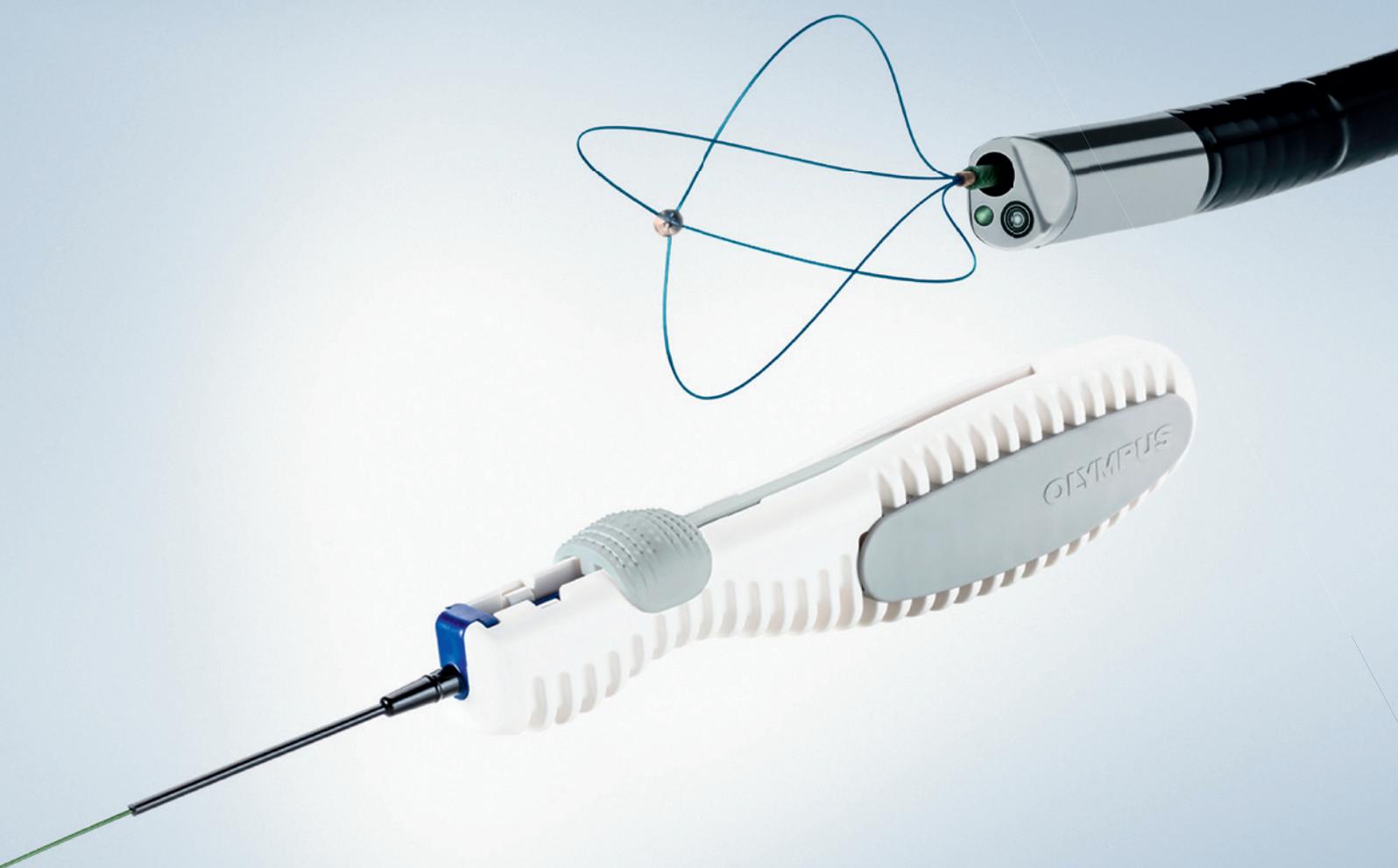

No-Tip Nitinol-Körbchen

Vielseitiges Portfolio

Flex-Catch 1,9 Ch.

Das Flex-Catch NT-Körbchen zur Steinextraktion passt sich besonders gut der Anatomie an, während es seine Grundform beibehält. So ist das Einfangen und die Freigabe von Steinen problemlos möglich. Das spitzenlose Design mit vier runden Drähten minimiert das Risiko für Gewebeerletzungen während der Prozedur. Das neue Körbchen lässt sich stufenlos öffnen, um Steine unterschiedlicher Größen einzufangen.

- **Schlanker Schaft von 1,9 Ch.:** Verbesserte Spülung und Sichtbarkeit in dünnen Arbeitskanälen.
- **Flexibler Schaft:** Maximale Abwinkelung des Endoskops und reibungsloses Einführen durch den Arbeitskanal des Endoskops.
- **Stufenlose Öffnung des Körbchens:** Einfache Kontrolle über die Größe des Fangkörbchens, damit selbst kleine Fragmente entfernt werden können.


Ultra-Catch 4-Draht No-Tip Nitinol-Körbchen

- Der Schaft mit guter Übertragung von Drehbewegungen und der ergonomische Handgriff verbessern die Lenkung und Sicherheit und gewährleisten so eine effektive und sichere Entfernung der Steine.
- Das Drehrad des Handgriffs erlaubt die einhändige Bedienung.
- Die hoch strapazierfähige Korbkonstruktion aus verdrehtem Draht bleibt selbst unter hoher Belastung in Form.
- Die Nitinol-Konstruktion sorgt für Knickfestigkeit des Schafts und damit für mehr Sicherheit, Funktionalität und Haltbarkeit.
- Das flexible Distalende minimiert den Biegeverlust des Endoskops.


X-Catch 6-Draht-Nitinol-Körbchen ohne Spitze

- Paired-Wire-Fangkörbchen für höhere radiale Dilatationskräfte zur Steinextraktion in beengten anatomischen Bereichen.
- Die Doppeldraht-Konstruktion ermöglicht zeitsparendes Fangen von mehreren kleinen Steinen in einem Durchgang.
- Spitzenloses Design für eine atraumatische Steinextraktion aus der Niere.

Merkmale Flex-Catch

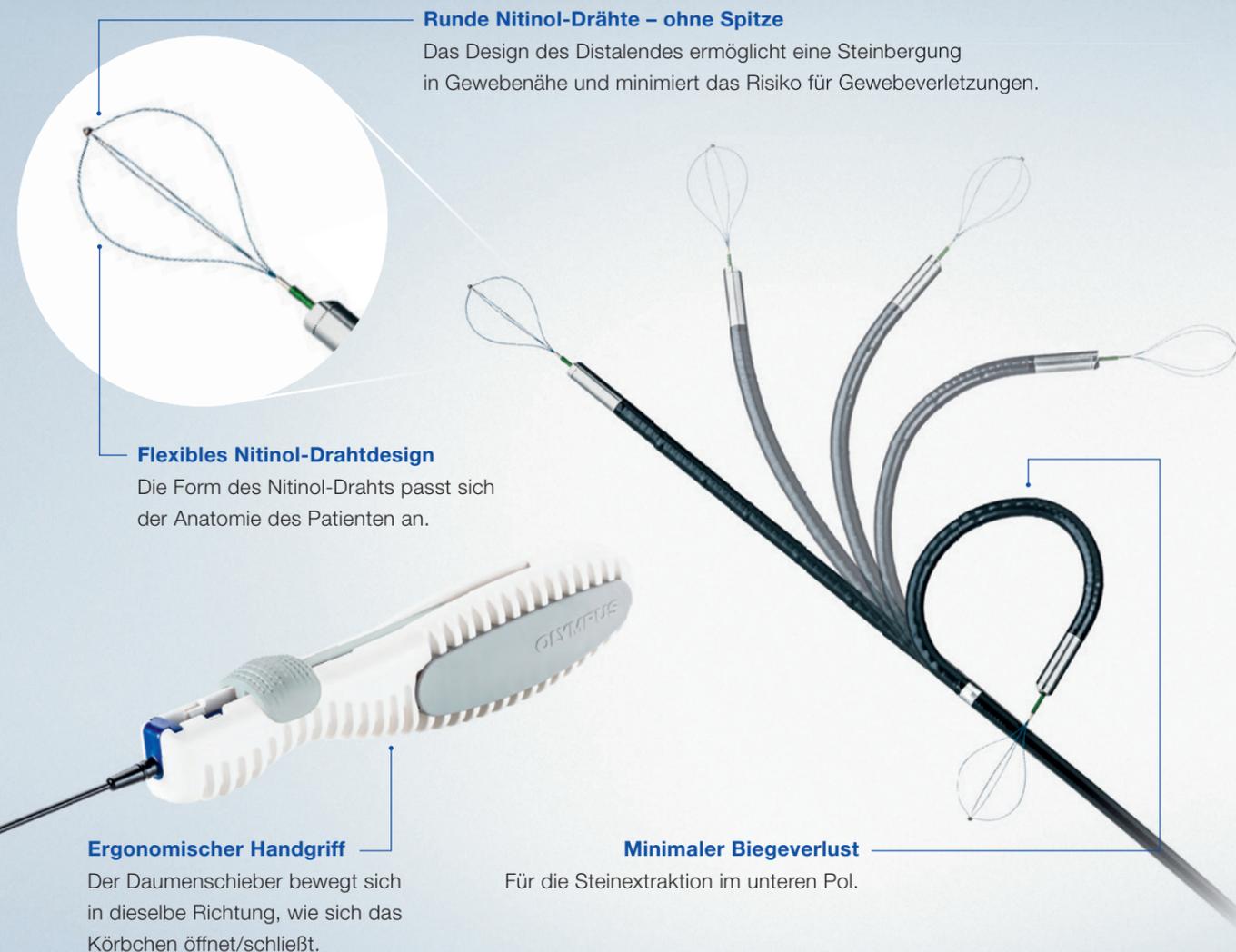

Merkmale Ultra-Catch und X-Catch

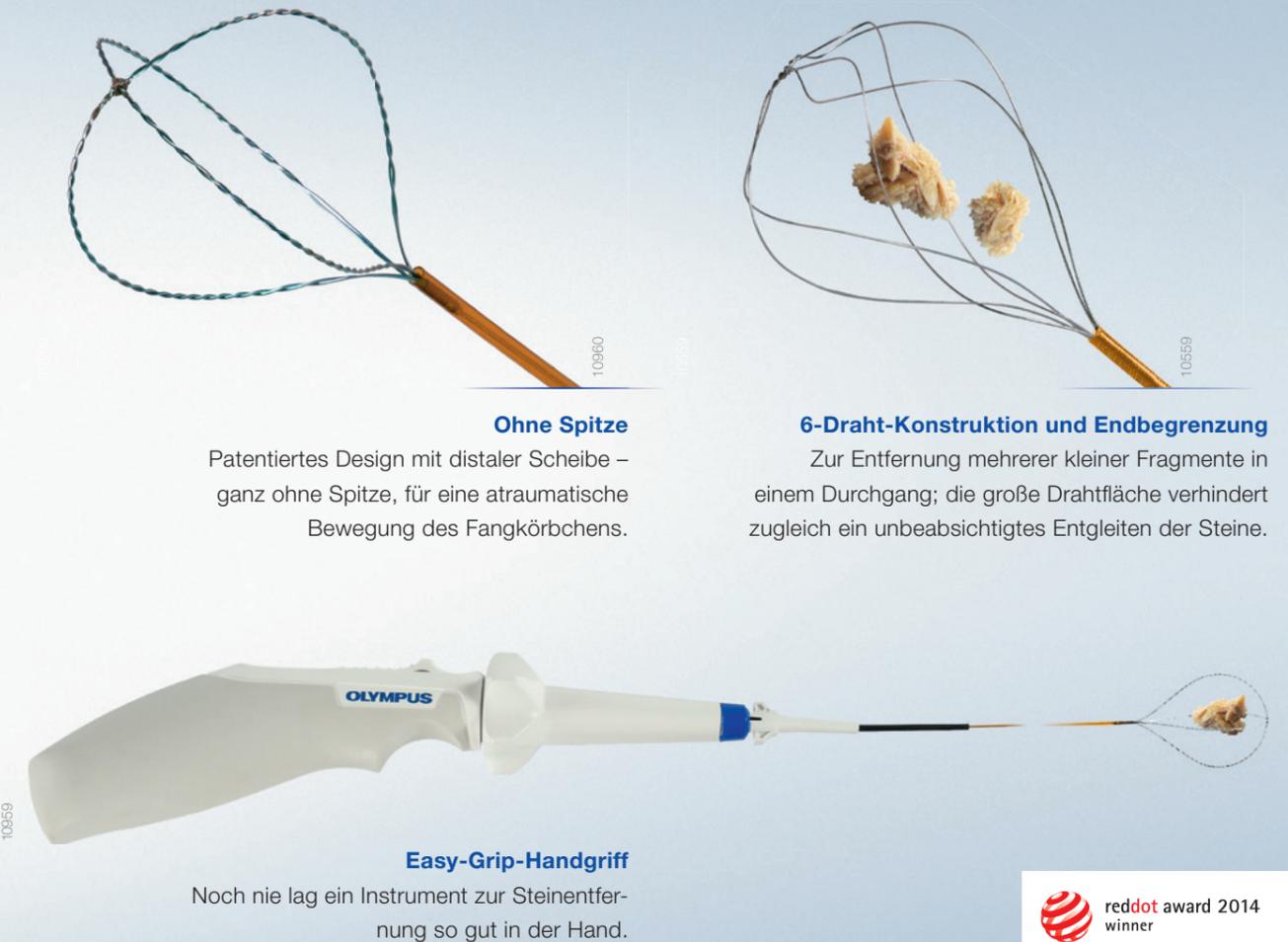

 www.olympus.eu/medical

Der Hersteller behält sich Änderungen der technischen Daten, der Ausstattung und des Designs ohne Vorankündigung vor.

OLYMPUS

OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH

Wendenstraße 14-18
20097 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 800 200 444 274
Fax: +49 40 23773-503305
E-Mail: endo.sales@olympus.de
www.olympus.de

OLYMPUS AUSTRIA GES.M.B.H.

Shuttleworthstraße 25
1210 Wien, Österreich
Telefon: +43 129 101-500
Fax: +43 129 101-222
E-Mail: office@olympus.at
www.olympus.at

OLYMPUS SCHWEIZ AG

Chriesbaumstrasse 6
8604 Volketswil, Schweiz
Telefon: +41 44 947 66 81
Fax: +41 44 947 66 54
E-Mail: endo.ch@olympus.ch
www.olympus.ch