

VideogastroscoPIO

GIF-XZ1200

Un gastroscoPIO innovador con un aumento 6ptico de 125x^{*1}



Un gastroscopio innovador con un aumento óptico de 125x^{*1}

Aumento óptico de 125x

El GIF-XZ1200 es un gastroscopio de aumento de última generación que permite la visualización de detalles excelentes de lesiones sospechosas con un aumento de hasta 125x^{*1}. Esta característica óptica avanzada aumenta con el NBI (Narrow Band Imaging) para una observación aún más refinada, ayudando así a obtener una mayor confianza y precisión en los diagnósticos.


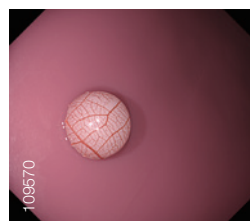



Imagen de luz blanca

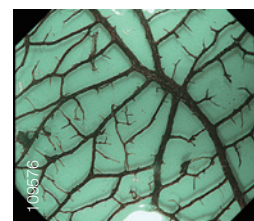

Aumento óptico de 125x con NBI

Modo de FPS (fotogramas por segundo) superior

El GIF-XZ1200 utiliza un método de exploración secuencial para producir imágenes de endoscopia. Además, gracias a la incorporación de un chip CMOS propio, el GIF-XZ1200 cuenta con un modo de FPS (fotogramas por segundo) superior^{*2} que permite capturar imágenes a 120 fotogramas por segundo. Esto ayuda a minimizar el parpadeo y la dispersión del color.

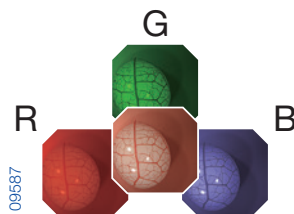

Control de aumento preciso mediante palanca de zoom

La palanca de zoom manual incluida se puede manipular y ajustar así el nivel de aumento con mayor precisión para obtener una imagen endoscópica ampliada que se ajuste mejor a sus necesidades.



Capuchón distal MAJ-1989

Para mejores resultados, recomendamos el uso del capuchón distal MAJ-1989. Especialmente útil con endoscopios de aumento, este accesorio ayuda a mantener una distancia óptima con respecto a la mucosa, lo que hace que sea más fácil mantener el enfoque.



Otras características

- ErgoGrip: sección de control mejorada
- Compatible con TXI, RDI, NBI cuando se conecta al CV-1500
- Conector estanco de un movimiento

^{*1} Con el monitor LCD OEV321UH 4K UHD. ^{*2} Solo disponible cuando se conecta al CV-1500.

Especificaciones		
Sistema óptico	Campo de visión	Normal: 140° Tele: 87°
	Dirección de visualización	Visión frontal
	Profundidad de campo	Normal: 7 - 100 mm Tele: 1,5 - 3 mm
Sección de inserción	Diámetro exterior del extremo distal	ø 9,9 mm
	Extremo distal ampliado	
Canal de trabajo	Diámetro exterior del tubo de inserción	ø 9,9 mm
	Longitud de trabajo	1030 mm
	Diámetro interior del canal	ø 2,8 mm
	Distancia mínima visible ^{*3}	2 mm (modo de enfoque normal)
	Dirección desde la que se introducen los accesorios EndoTherapy y salen de la imagen endoscópica	
Canal auxiliar de agua	Dirección en la cual aparece la inyección de agua en la imagen endoscópica	
Sección de curvado		Arriba: 210° / Abajo: 90° / Derecha: 100° / Izquierda: 100°
Longitud total		1350 mm
Sistema compatible		Videoprocador CV-1500 Videoprocador CV-290 Fuente de luz CLV-290SL, CLV-290

^{*3} Distancia desde el extremo distal del endoscopio.



VIDEOGASTROSCOPIO EVIS X1 GIF-XZ1200

Dado que los conocimientos médicos aumentan constantemente, es posible que se produzcan cambios o modificaciones técnicas en el diseño del producto, las especificaciones del producto, los accesorios y ofertas de servicios.