

Monitor LCD 4K UHD

OEV321UH

32-calowy monitor LCD zoptymalizowany dla systemów endoskopowych firmy Olympus



OEV321UH

Wysokowydajny wyświetlacz

Ten 32-calowy monitor LCD o Ultra Wysokiej Rozdzielczości obrazu (UHD) wydobywa pełen potencjał systemów endoskopowych firmy Olympus. Funkcja skalowania do rozdzielczości 4K umożliwia wykorzystanie istniejących systemów obrazowania o jakości HD.

Technologia A.I.M.E.™

Funkcja Advanced Image Multiple Enhancer (A.I.M.E.™) tworzy ostre, wyraźne obrazy poprzez wzmocnienie zarówno struktury, jak i koloru, co umożliwia prowadzenie bardziej szczegółowych obserwacji.

Wszechstronne przekazywanie sygnału

Monitor OEV321UH umożliwia przekazywanie sygnałów wideo 4K/HD przez jedno wyjście 12G-SDI. Różne gniazda wejściowe i wyjściowe oferują imponujące możliwości połączeń dostosowane do wymagań użytkownika.

Złącza wejściowe/wyjściowe



Wiele trybów wyświetlania

Tryby wyświetlania Picture-in-Picture (PIP) i Picture-out-Picture (POP) zapewniają optymalne wsparcie podczas procedur.

Praktyczna funkcja CLONE OUT


Użytkownicy mogą powielać wyświetlane na ekranie sygnały wideo 4K/HD, w tym PIP/POP, na drugi monitor lub urządzenie rejestrujące.

Konstrukcja przyjazna dla użytkownika

Gładka powierzchnia panelu przedniego, w tym znajdujących się na nim przycisków sterowania, sprawia, że łatwo go wyczyścić. Dzięki złączom skierowanym w dół, zdejmowanej pokrywie przewodów i okienku szybkiego dostępu podłączanie tego monitora jest bardzo proste.

Dane techniczne monitora OEV321UH		
Wyświetlacz	Rozmiar wyświetlacza	31,5 cala (800,8 mm)
	Technologia panelu	LCD TFT z aktywną matrycą
	Rozdzielczość / współczynnik proporcji	3840 × 2160 / 16:9
	Jasność	450 cd/m²
	Kontrast	1000:1
	Przestrzeń barw	BT.2020 / BT.709
	Kąt widzenia	178°/178°
	Kolory	1,07 miliarda
Funkcje	Podświetlenie	LED
	Wzmocnienie obrazu	A.I.M.E.™
	Wyświetlanie wielu obrazów	PIP/POP
	Wzorzec odwracania	Obrót
Wejście Wyjście	4K wejście	12G-SDI ×2*, Display Port ×1, HDMI ×1
	4K wyjście	12G-SDI ×2*
	2K wejście	3G-SDI ×1, DVI-D ×1
	2K wyjście	3G-SDI ×1
Ogólne	CLONE OUT / AUX IN	12G-SDI ×1* / dowolny port
	Zasilanie	AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, 1,7 A–0,8 A DC przez opcjonalny adapter AC AC-300MD
	Rozmiar	753,9 × 476,3 × 79,2 mm
	Masa	11,8 kg
	Zdalne	Złącze 9-stykowe D-sub RS-232C

* Jeśli używany jest kabel 12G-SDI dłuższy niż MAJ-2429 (8,5 m), należy skontaktować się z firmą Olympus.

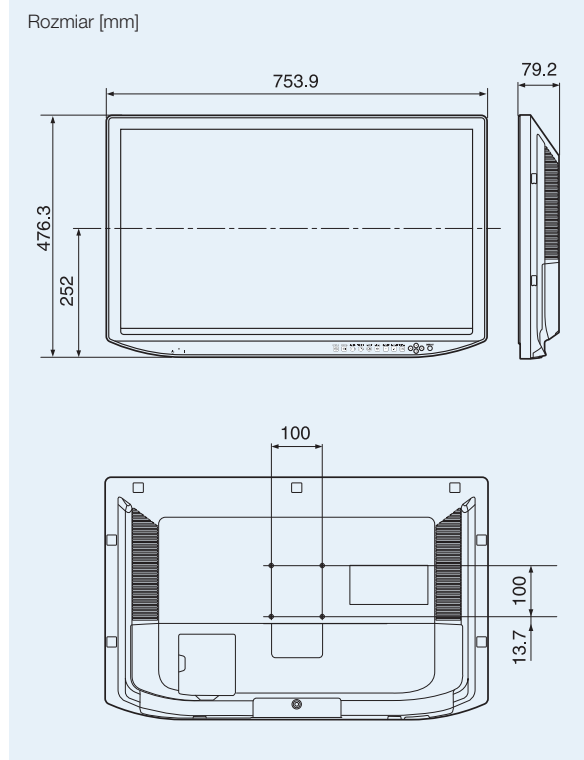

Firma Olympus zastrzega sobie prawo do błędów, modyfikacji i zmian w ofercie usług i/lub produktów.

OLYMPUS

OLYMPUS POLSKA SP. Z O.O.
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 366 00 77, Faks: +48 22 366 00 49
E-mail: biuro.polska@olympus-europa.com
www.olympus.pl