

Efficienza e scelta


DIEGO ELITE – Il sistema motorizzato per rinologia Olympus



DIEGO ELITE Multidebrider

Efficienza – Puntiamo a migliorare la chirurgia quotidiana

DIEGO ELITE Multidebrider è un sistema motorizzato per otorinolaringoiatria progettato per offrire ai chirurghi una scelta migliore per l'esecuzione degli interventi, garantendo al contempo caratteristiche mirate a migliorare l'efficienza chirurgica.

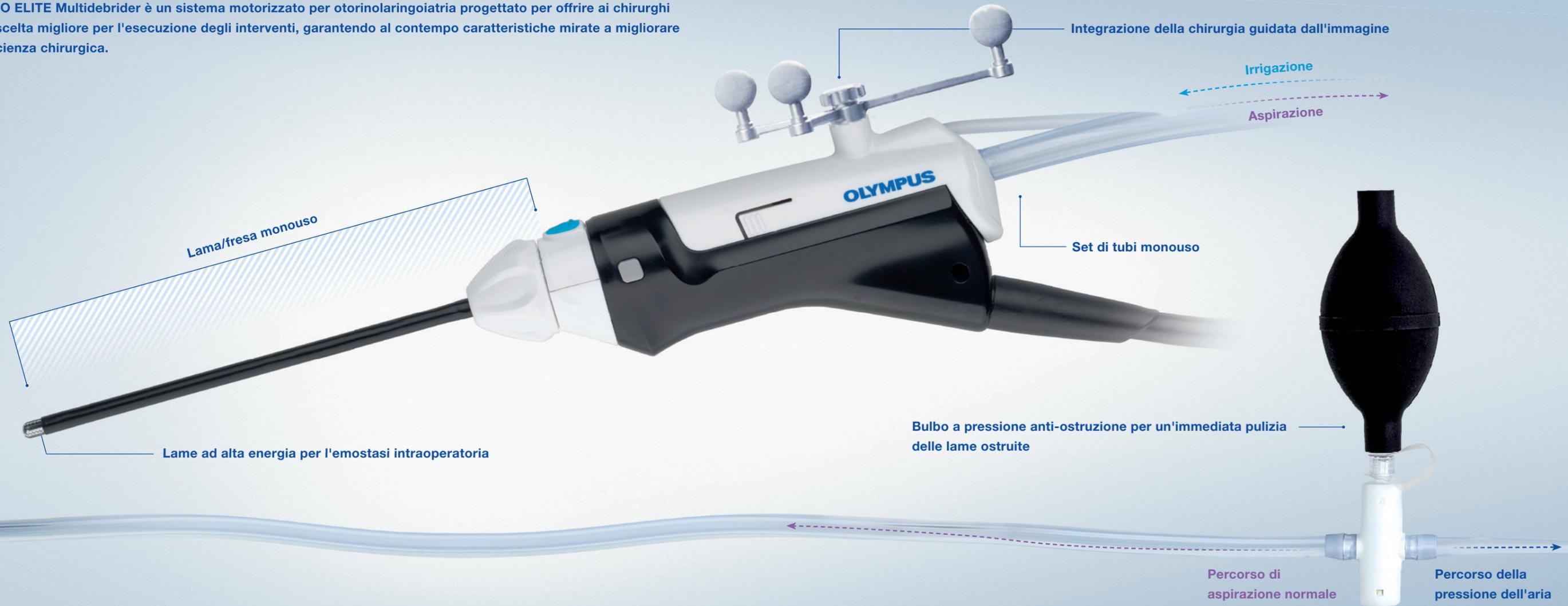

Panoramica dell'intero sistema

Console touchscreen

- Utilizzo semplice e intuitivo.
- Riconoscimento ID lama con impostazione ottimale predefinita.
- Unità di aspirazione dedicata.



Manipoli riutilizzabili

- Opzione dritta e angolata.
- Impugnatura ergonomica e confortevole.
- Autoclavabile.



Tubo di aspirazione

- Percorso di aspirazione completamente monouso.
- Tubo di aspirazione anti-ostruzione per un'immediata pulizia delle lame ostruite.



Levetta di arresto

- Un'unica azione per aprire o chiudere completamente la finestra della lama.
- Maggiore efficienza.





Scelta — Diversi modi di eseguire un intervento chirurgico

Portfolio lame

Il sistema **DIEGO ELITE Multidebrider** offre ai chirurghi la possibilità di eseguire un intervento in diversi modi, utilizzando anche strumenti a due impugnature con un'ampia selezione di lame, quali frese o standard, e un set di tubi anti-ostruzione.

Lame standard

Con o senza aspirazione distale per la rimozione standard di tessuto molle nella regione nasale.



Lame di tipo A

Per resezioni avanzate.



Lame ad alta energia

Lame ad alta energia bipolari e monopolari per emostasi immediata durante gli interventi chirurgici, **con o senza** aspirazione distale.



Lame angolate

Ampia varietà di angoli, tra cui 0°, 15°, 60°, 75° e 90°.



Lame girevoli: vantaggio

Permettono al chirurgo di raggiungere aree diverse della regione nasale senza dover ruotare il manipolo.



Lame per turbinati

Lame per turbinati da 2 mm per resezioni avanzate disponibili anche in versione bipolare.



Oltre la Chirurgia endoscopica sinusale funzionale (FESS)

Lame per tonsille e adenoidi

Un'ampia gamma di lame malleabili per la resezione di tonsille e adenoidi. Include opzioni bipolari e monopolari per la stabilizzazione del letto adenoidale e la cauterizzazione.



Portfolio frese

Il sistema **DIEGO ELITE** offre una selezione completa di frese per procedure **FESS**.

Fresa a forma di oliva diamantata

Portfolio di frese diamantate a forma di oliva per la rimozione delicata di strutture ossee e cartilaginee. Disponibili in diverse angolazioni.



Fresa diamantata a forma conica

Portfolio di frese diamantate a forma conica per allargare le aperture e rimuovere osso e cartilagine, specialmente se si opera dal lato posteriore verso l'anteriore, per una migliore visuale. Disponibili in diverse angolazioni.




Fresa diamantata a forma sferica

Rimozione mediante diamante di strutture ossee e cartilaginee delicate. Disponibili in diverse angolazioni.




Frese cilindriche scanalate

Portfolio di frese da taglio per la rimozione di strutture ossee e cartilaginee più avanzate. Disponibili in diverse angolazioni.

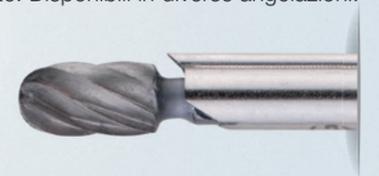

Frese angolate

Il portfolio completo delle frese comprende un'ampia varietà di angoli, tra cui 15°, 60° e 70°.

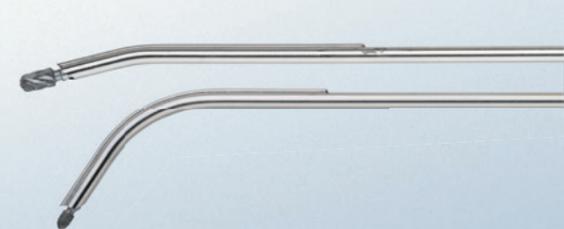

Lame per laringe

Per la rimozione di lesioni laringee e la riduzione dei tumori. Disponibili da 2,9 e 4 mm con una lunghezza di 22 cm per l'area subglottidea/tracheale superiore o 27 cm per applicazioni glottidee/sovraglottidee.



Sapevate che ...

Olympus offre un portfolio See-and-Treat completo per interventi di rinologia in ambulatorio o in sala operatoria

Trattamento per immagini

Trattamento



Considerata la costante evoluzione delle conoscenze mediche, possono essere necessarie modifiche tecniche o variazioni del design del prodotto, delle specifiche del prodotto e degli accessori.

OLYMPUS

OLYMPUS ITALIA S.R.L.
Via Modigliani 45, 20090 Segrate (MI), Italia
Telefono: +39 02 26 97 21, Fax: 39 02 26 97 24 88
E-mail: olympus.italia@olympus-europa.com
www.olympus.it

OLYMPUS SCHWEIZ AG
Richtiring 30, 8304 Wallisellen, Svizzera
Telefon: +41 44 94766-81, Fax: +41 44 94766-54
E-Mail: medical.ch@olympus.ch
www.olympus.ch