

OLYMPUS

**VISERA
ELITE II**

Testa di telecamera HD

CH-S200-08-LB

Testa di telecamera HD leggera e prestazioni NBI migliorate con VISERA ELITE II



Corpo leggero per un utilizzo più agevole e confortevole

Questa testa di telecamera leggera a forma di pendolo è progettata in modo ergonomico, per adattarsi alla mano del chirurgo durante gli interventi.

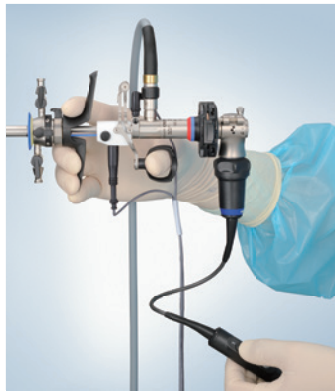


Immagine ad alta definizione

La testa di telecamera CH-200-08-LB può catturare immagini a definizione molto più alta rispetto alle teste di telecamera SD, contribuendo pertanto a migliorare le abilità diagnostiche e terapeutiche.

Compatibilità con un'ampia gamma di metodi di decontaminazione

La testa di telecamera CH-S200-08-LB è compatibile con la lavadisinfettatrice (WD, ISO 15883-1, -2) e le apparecchiature di sterilizzazione a bassa temperatura con perossido di idrogeno (Steris V-Pro® maX e STERRAD® 100S/NX/100NX)

Prestazioni NBI migliorate con VISERA ELITE II

L'NBI (Narrow Band Imaging) filtra la luce bianca in specifiche lunghezze d'onda che vengono assorbite dall'emoglobina, restituendo una visualizzazione migliorata delle reti capillari e della morfologia della mucosa. Se si utilizza il sistema VISERA ELITE II, questa testa di telecamera produce un'immagine NBI più luminosa del 20%.**



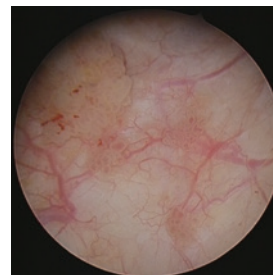


Immagine a luce bianca*

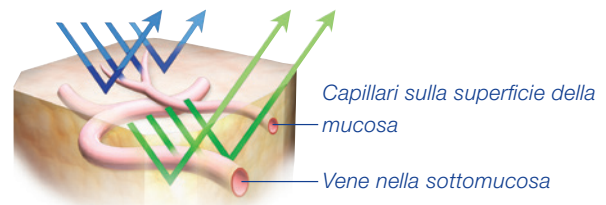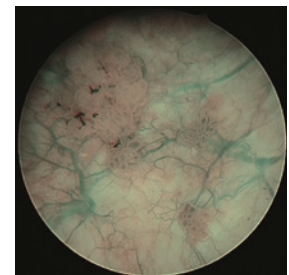

NBI*

* Questa immagine è stata catturata con CH-S190-08-LB, che offre lo stesso design di qualità dell'immagine.

**rispetto a VISERA ELITE

Specifiche		
Dimensioni	Testa di telecamera	ø 32 x 87 mm
	Cavo	ø 3,3 mm x 3,5 m
	Peso	90 g (esclusi gli interruttori (20 g))
Osservazione	Sistema di rilevamento	Rivelatore di immagini CCD a stato solido tipo interlinea
Classificazione (Apparecchiatura elettromagnetica)	Grado di protezione da scariche elettriche	Tipo BF
	Grado di protezione dalle esplosioni	Il prodotto deve essere conservato lontano da gas infiammabili.
Pulizia/Disinfezione, sterilizzazione	Pulizia/disinfezione	Immergibile in soluzione disinfettante e lavadisinfettatrice
	Sterilizzazione	Sterilizzazione a gas ossido di etilene e sterilizzazione a bassa temperatura con perossido di idrogeno



TESTA DI TELECAMERA HD
OLYMPUS CH-S200-08-LB



VISERA ELITE II
VIDEOPROCESSORE
OLYMPUS OTV-S200/OTV-S300

Considerata la costante evoluzione delle conoscenze mediche, possono essere necessarie modifiche tecniche o variazioni del design del prodotto, delle specifiche del prodotto, degli accessori e delle offerte di servizi.

